

Benutzerhandbuch

Autoklav

Vacuklav[®] 41 B+ Vacuklav[®] 43 B+

ab Software-Version 3.098



Sehr geehrte Frau Doktor, sehr geehrter Herr Doktor!

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses MELAG Produktes entgegengebracht haben.

Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen und konzentrieren uns seit der Gründung im Jahr 1951 konsequent auf Produkte für die Praxishygiene. Durch ständiges Streben nach Qualität, höchster Funktions-Sicherheit und Innovationen gelang uns der Aufstieg zum Weltmarktführer im Bereich der Instrumentenaufbereitung und Hygiene.

Sie verlangen zu Recht von uns optimale Produkt-Qualität und Produkt-Zuverlässigkeit. Mit der konsequenten Realisierung unserer Leitsätze „**competence in hygiene**“ und „**Quality – made in Germany**“ garantieren wir Ihnen, diese Forderungen zu erfüllen. Unser zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem wird u.a. in jährlichen mehrtägigen Audits nach ISO 13485 und ISO 9001 überwacht. Hierdurch ist gewährleistet, dass MELAG-Produkte nach strengen Qualitätskriterien gefertigt und geprüft werden!

Die Geschäftsführung und das gesamte MELAG-Team.

Für Ärztinnen/Ärzte, Arzthelferinnen/Arzthelfer und Service

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch, bevor Sie den Autoklav in Betrieb nehmen. Die Anweisung enthält wichtige Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig in der Nähe Ihres Autoklaven auf. Es ist Teil des Produktes.

Benutzerhandbuch Vacuklav®41 B+, Vacuklav®43 B+

Gültig für Vacuklav®41 B+, Vacuklav®43 B+

Verantwortlich für den Inhalt: MELAG Medizintechnik oHG

MELAG Medizintechnik oHG
Geneststraße 6-10
10829 Berlin
Deutschland

E-Mail: info@melag.de
www.melag.de

Dokument: BA_D_41B+_43B+_v9.docx/Revision: 9 – 17/2370

Änderungsdatum: 07.12.2017

Technische Änderungen vorbehalten

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Autoklaven der Premium-Plus-Klasse von MELAG entschieden haben.

Die Autoklaven Vacuklav®41 B+ und Vacuklav®43 B+ werden in diesem Benutzerhandbuch gemeinsam beschrieben. Sie gleichen sich mit Ausnahme ihrer Kesseltiefe und Gerätetiefe.

Gerätebezeichnung

In dieser Anweisung wird für die Dampfsterilisatoren Vacuklav®41 B+ und Vacuklav®43 B+ die Gerätebezeichnung Autoklav verwendet.

Benutzerhandbuch

Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise und Informationen, die Sie für die Bedienung des Autoklaven benötigen. Lesen Sie das Handbuch der Reihenfolge nach vollständig durch.

Vermeiden Sie Gefahren

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise aufmerksam bevor Sie den Autoklav einsetzen.

Zu dieser Anweisung








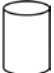









Symbol	Bedeutung	Erklärung
 Gefahr!	Gesundheitsgefährdung	Weist auf eine gefährliche Situation hin, deren Nichtvermeidung leichte bis lebensgefährliche Verletzungen zur Folge haben kann.
 Achtung!	Unbedingt beachten	Weist auf eine gefährliche Situation hin, deren Nichtvermeidung zu einer Beschädigung der Instrumente, der Praxiseinrichtung oder des Autoklaven führen kann.
	Wichtige Information	Weist auf wichtige Informationen hin.

Tabelle 1: Bedeutung der Symbole, die in dem Benutzerhandbuch verwendet werden

Beispiel Hervorhebung	Bedeutung	Erklärung
Universal-Programm	Softwarezitat	Wörter oder Wortgruppen, die auf dem Touch-Display des Autoklaven erscheinen, sind als Softwarezitat gekennzeichnet.
Kapitel 6 – Protokollieren	Querverweis	Verweis auf einen anderen Textabschnitt innerhalb dieser Anweisung.
Abbildung 1/(5)	Querverweis	Verweis auf ein Detail in einer Abbildung – im Beispiel auf Teil Nr. 5 in Abbildung 1.

Tabelle 2: Bedeutung des hervorgehobenen Textes innerhalb des Benutzerhandbuches

Symbole auf dem Autoklav

Symbol	Erklärung
	Hersteller des Medizinproduktes
	Herstellungsdatum des Medizinproduktes
	Seriennummer des Medizinproduktes vom Hersteller
	Artikelnummer des Medizinproduktes
	Angaben zum Volumen des Kessels
	Betriebstemperatur des Geräts
	Betriebsdruck des Geräts
	Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitshinweise. Eine Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu personellen und materiellen Schäden führen.
	Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die lang andauernde Funktionstüchtigkeit und die Werterhaltung Ihres Gerätes hängen vor allen Dingen von der Pflege des Gerätes ab. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch in der Nähe Ihres Gerätes auf. Es ist Teil des Produktes.
	Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es muss über den Inverkehrbringer einer sach- und fachgerechten Entsorgung zugeführt werden. Mit der Kennzeichnung eines Gerätes durch dieses Symbol erklärt der Hersteller außerdem, dass er alle Anforderungen aus dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten erfüllt. MELAG-Geräte stehen für höchste Qualität und lange Lebensdauer. Wenn Sie Ihr MELAG-Gerät aber nach vielen Jahren des Betriebes endgültig stilllegen wollen, kann die dann vorgeschriebene Entsorgung des Gerätes auch bei MELAG in Berlin erfolgen. Setzen Sie sich hierfür bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.
	Durch die Kennzeichnung mit diesem CE-Zeichen wird vom Hersteller erklärt, dass das Medizinprodukt den grundlegenden Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie entspricht. Die vierstellige Nummer besagt, dass eine zugelassene Zertifizierstelle dieses überwacht.
	Durch die Kennzeichnung mit diesem CE-Zeichen CE wird vom Hersteller erklärt, dass das Medizinprodukt den grundlegenden Anforderungen der Druckgeräteichtlinie entspricht. Die vierstellige Nummer besagt, dass eine zugelassene Zertifizierstelle dieses überwacht.
	Weist darauf hin, dass für den Betrieb des Autoklaven unbedingt die Sicherheitshinweise im Benutzerhandbuch zu beachten sind.
	Weist auf eine heiße Oberfläche hin. Berühren Sie mit diesem Symbol gekennzeichnete Bereiche am Gerät nicht während des Betriebs. Lassen Sie das Gerät nach Programmende abkühlen. Bei Ausfall des Kühlerlüfters können die Kühlrippen heiß werden.



Sicherheitshinweise

Beachten Sie für den Betrieb des Autoklaven die nachfolgend aufgeführten und die in den einzelnen Kapiteln enthaltenen Sicherheitshinweise.

- | | |
|---|---|
| <p>Bestimmung</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sterilisieren Sie keine Flüssigkeiten mit diesem Autoklav. |
| <p>Netzkabel und Netzstecker</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Beschädigen oder verändern Sie niemals Netzkabel oder Netzstecker. ■ Betreiben Sie den Autoklav niemals, wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind. ■ Ziehen Sie nie am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu entfernen. Fassen Sie immer direkt am Netzstecker an. |
| <p>Doppelmantel-Dampferzeuger</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nach dem Ausschalten des Autoklaven steht der Autoklav noch längere Zeit unter Druck. Kontrollieren Sie die Druckanzeige des Manometers unten an der Frontseite des Autoklaven. |
| <p>Aufstellung, Installation, Inbetriebnahme</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Lassen Sie den Autoklav nur von Personen aufstellen, installieren und in Betrieb nehmen, die durch MELAG autorisiert sind. ■ Betreiben Sie den Autoklav nur in nicht explosionsgefährdeten Bereichen. ■ Lassen Sie den Elektroanschluss und die Anschlüsse für Zu- und Abwasser nur von einem Fachmann einrichten. ■ Dokumentationsmedien (Computer, CF-Kartenlesegerät usw.) müssen so platziert werden, dass sie nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen können. |
| <p>Aufbereitung und Sterilisation von Textilien und Instrumenten</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Befolgen Sie die Anweisungen der Textil- und Instrumentenhersteller zur Aufbereitung und Sterilisation von Textilien und Instrumenten. ■ Beachten Sie die für die Aufbereitung und Sterilisation von Textilien und Instrumenten relevanten Normen und Richtlinien z.B. von RKI und DGSV. ■ Verwenden Sie nur Verpackungsmaterialien und -Systeme, die laut Herstellerangaben für die Dampfsterilisation geeignet sind. |
| <p>Programmabbruch</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Beachten Sie, dass beim Öffnen der Tür nach einem Programmabbruch, in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Programmabbruchs, heißer Wasserdampf aus dem Kessel austreten kann. ■ In Abhängigkeit vom Zeitpunkt eines Programmabbruchs kann die Beladung unsteril sein. Beachten Sie die deutlichen Hinweise auf dem Display des Autoklaven. Sterilisieren Sie gegebenenfalls das betreffende Sterilisiergut nach erneutem Verpacken noch einmal. |
| <p>Entnahme des Sterilgutes</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Öffnen Sie nie gewaltsam die Tür. ■ Verwenden Sie zur Entnahme der Tablett ein Tablettheber. Berühren Sie nie mit ungeschützten Händen das Sterilgut, den Kessel oder die Innenseite der Tür. Die Teile sind heiß. ■ Kontrollieren Sie die Verpackung des Sterilgutes bei der Entnahme aus dem Autoklav auf Beschädigungen. Sollte eine Verpackung beschädigt sein, verpacken Sie das Sterilisiergut neu und sterilisieren es noch einmal. |
| <p>Wartung</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Lassen Sie die Wartung nur von autorisierten Personen durchführen. ■ Halten Sie die vorgegebenen Wartungsabstände ein. |
| <p>Tragen des Autoklaven</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tragen Sie den Autoklav nur zu zweit. ■ Verwenden Sie für das Tragen des Autoklaven geeignete Tragegurte. |
| <p>Betriebsstörungen</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sollten beim Betrieb des Autoklaven wiederholt Störungsmeldungen auftreten, setzen Sie den Autoklav außer Betrieb. ■ Lassen Sie den Autoklav nur durch autorisierte Personen instand setzen. |

Inhaltsverzeichnis

Symbole auf dem Autoklav..... II

Kapitel 1 – Leistungsbeschreibung 4

Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	4
Anwendernutzen.....	4
Übersicht Sterilisierprogramme	6

Kapitel 2 – Gerätebeschreibung..... 7

Lieferumfang.....	7
Geräteansichten	8
Nutzraum.....	9
Halterungen für die Beladung.....	9
Bedienpanel.....	10
LED Statusleiste	11
Versorgung mit Speisewasser	12
Autoklav einschalten.....	13
Nach dem Einschalten.....	13
Tür schließen.....	14

Kapitel 3 – Erste Inbetriebnahme..... 15

Bedingungen für das Aufstellen, Installieren und in Betrieb nehmen	15
Anforderungen an den Aufstellort.....	15
Anschlüsse vorsehen	16
Voraussetzungen für die erste Inbetriebnahme....	17
Installations- und Aufstellungsprotokoll	17

Kapitel 4 – Sterilisieren..... 18

Voraussetzungen schaffen	18
Sterilisiergut vorbereiten.....	18
Autoklav beladen.....	20
Programm auswählen.....	22
Programm starten.....	24
Programm läuft.....	24
Sterilisierphase ist beendet	26
Trocknungsphase	26
Programm ist beendet	26
Freigabeprozess.....	27
Sterilgut entnehmen	27
Sterilgut lagern	28

Kapitel 5 – Protokollieren..... 29

Chargendokumentation	29
CF-Card als Ausgabemedium	30
PC als Ausgabemedium verwenden.....	30
Protokoll-Drucker als Ausgabemedium	31
Label-Printer als Ausgabemedium.....	31
Protokolle sofort automatisch ausgeben.....	31
Gespeicherte Protokolle nachträglich ausgeben ..	32

Format für Programmprotokolle festlegen	34
Protokolle richtig lesen	35
Protokolle finden.....	37

Kapitel 6 – Einstellungen 38

Datum und Uhrzeit einstellen.....	38
Benutzerverwaltung.....	38
Protokoll-Drucker als Standarddrucker ein-richten	39
Label-Printer als Standarddrucker einrichten.....	40
Wasserversorgung	40
Energiesparmodus	41
Screensaver	41

Kapitel 7 – Instandhaltung..... 43

Reinigen	43
Fleckenbildung vermeiden.....	44
Qualitativ hochwertiges Speisewasser verwenden	44
Türspindel ölen.....	45
Wartung.....	45

Kapitel 8 – Betriebspausen..... 46

Sterilisierhäufigkeit	46
Pausenzeiten.....	46
Außerbetriebsetzung	47
Transport.....	47
Wiederinbetriebnahme nach Ortswechsel	48

Kapitel 9 – Funktionsprüfung..... 49

Automatische Funktionsprüfung	49
Manuelle Funktionsprüfung	49
Prüfungen im täglichen Betrieb.....	49
Vakuumtest.....	49
Bowie & Dick-Test	50

Kapitel 10 – Betriebsstörungen..... 51

Eine Warnung ist keine Störung	51
Mitteilungen	51
Warnhinweise.....	51
Störungsmeldungen	51
Bevor Sie anrufen.....	51
Schlechte Trocknungsergebnisse.....	55

Technische Daten..... 56

Glossar

Anhang A – Zubehör

Kapitel 1 – Leistungsbeschreibung

In diesem Kapitel erfahren Sie

- unter welchen Bedingungen und für welchen Zweck Sie diesen Autoklav einsetzen
- welchen Nutzen Sie durch den Einsatz dieses Autoklaven erzielen
- welche Sterilisierprogramme Sie nutzen können

Einsatzgebiet

Sterilisieraufgaben



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Autoklav ist für den Einsatz im medizinischen Bereich, z.B. in allgemeinen Arztpraxen und Zahnarztpraxen, vorgesehen.

Nach DIN EN 13060 handelt es sich bei diesem Autoklav um einen Klasse-B-Sterilisator. Als Universal-Autoklav ist er für anspruchsvolle Sterilisieraufgaben geeignet. So können Sie z.B. englumige Instrumente und Übertragungsinstrumente – verpackt oder unverpackt – und größere Mengen Textilien sterilisieren.

Beachten Sie für den Einsatz des Autoklaven folgende Hinweise:

- Sterilisieren Sie keine Flüssigkeiten mit diesem Autoklav. Er ist für die Sterilisation von Flüssigkeiten nicht zugelassen.

Bei Nichtbeachtung kann es zum Siedeverzug kommen, die Beschädigung des Autoklaven und Verbrennungen könnten die Folge sein.

- Verwenden Sie den Autoklav nur für die in den zugehörigen technischen Dokumenten vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit den von MELAG empfohlenen Geräten und Komponenten.
- Wie die vorangehende Instrumentenaufbereitung ist auch die Sterilisation von Instrumenten und Textilien mit diesem Autoklav nach §2 der MPBetreibV nur von sachkundigem Personal durchzuführen.
- Setzen Sie bei der Sterilisation nur Instrumente, Verpackungen und Textilien ein, die laut Herstellerangaben für die Dampfsterilisation geeignet sein.

Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden und/oder Sicherheitsbeeinträchtigungen kommen.

Anwendernutzen

Universeller Einsatz

Der Autoklav sterilisiert auf der Grundlage des fraktionierten Vakuumverfahrens. Dieses gewährleistet die vollständige und effektive Benetzung bzw. Durchdringung des Sterilisiergutes mit Sattdampf. Mit diesem Verfahren ist die Sterilisation aller in einer Arztpraxis vorkommenden Beladungen möglich.

**Große Mengen
Geringer Zeitaufwand
Keine Pausenzeiten
Überhitzungsschutz**

Für die Erzeugung des Sterilisierdampfes nutzt der Autoklav einen Doppelmantel-Dampferzeuger. Dort steht nach dem Aufheizen permanent Dampf zur Verfügung. Die Wände der Sterilisierkammer haben dadurch eine definierte Temperatur. Die Sterilisierkammer ist vor Überhitzung geschützt und Sie können große Mengen Instrumente oder Textilien in kürzester Zeit nacheinander sterilisieren und sehr gute Trocknungsergebnisse erzielen.

Sauberes Speisewasser

Der Autoklav arbeitet mit einem Speisewasser-Einweg-System. Das heißt, dass er für jeden Sterilisiervorgang frisches Speisewasser verwendet. Die Qualität des Speisewassers wird über eine integrierte Leitwertmessung permanent überwacht. So werden Flecken auf Instrumenten und eine Verschmutzung des Autoklaven – sorgfältige Instrumentenvorbereitung vorausgesetzt – verhindert.

Automatische Speisewasser-versorgung

Die Versorgung mit Speisewasser für die Dampferzeugung erfolgt automatisch über den internen Vorratstank oder eine Wasser-Aufbereitungsanlage (z.B. MELAdem®40, MELAdem®47).

Optimale Trocknung bei verpacktem Sterilisiergut

Die Trocknung des Sterilisiergutes erfolgt durch das Vakuum. (Vakuum-trocknung). So erhalten Sie auch bei verpacktem Sterilisiergut optimale Trocknungsergebnisse.

Optimierte Gesamt-betriebszeit

Der Autoklav arbeitet mit einer elektronischen Parametersteuerung. Damit optimiert der Autoklav die Gesamtbetriebszeit eines Programms in Abhängigkeit der Beladung.

Hohe Sicherheit durch umfangreiche Sicherheits-vorrichtungen

Der Autoklav überprüft jederzeit Druck und Temperatur in der Sterilisierkammer und lässt ein Öffnen der Tür bei Überdruck im Kessel nicht zu. Der motorgetriebene automatische Türverschluss öffnet die Tür langsam durch Drehen der Verschluss spindle und hält die Tür, während sie öffnet. Selbst bei Druckunterschieden würde bis zum vollständigen Öffnen der Tür ein Druckausgleich stattfinden.

Menge und Qualität des Speisewassers werden geprüft.

In der Elektronik des Autoklaven ist ein Prozessbeurteilungssystem integriert. Es vergleicht während eines Programms solche Prozessparameter wie Temperaturen, Zeiten und Drücke untereinander. Es überwacht die Parameter hinsichtlich ihrer Grenzwerte bei Ansteuerung und Regelung und gewährleistet eine sichere und erfolgreiche Sterilisation.

Ein Überwachungssystem prüft die Gerätekomponenten des Autoklaven hinsichtlich ihrer Funktionstüchtigkeit und ihres plausiblen Zusammenspiels.

Wenn ein oder mehrere Parameter festgelegte Grenzwerte überschreiten, gibt der Autoklav Warnhinweise oder Störungsmeldungen aus und bricht, wenn nötig, das Programm ab. Beachten Sie nach einem Programmabbruch die Hinweise auf dem Display.

Zusätzliche Funktions-kontrolle

Mit Hilfe von Testprogrammen können Sie jederzeit eine zusätzliche Funktionskontrolle durchführen.

Mit dem Vakuumtest prüfen Sie den Autoklav auf Leckagen im Dampfsystem.

Mit dem Bowie & Dick-Test prüfen Sie auf ausreichende Dampfdurchdringung von porösem Sterilisiergut (z.B. Textilien).

effektive Chargen-dokumentation

Der Autoklav verfügt über einen internen Protokollspeicher. In diesem werden immer alle Daten der gelaufenen Sterilisierprogramme automatisch abgelegt.

Sie können den internen Protokollspeicher sofort nach Programmende oder später auslesen. Dabei legen Sie fest, ob die Protokolldaten auf ein oder mehrere verschiedene Ausgabemedien ausgegeben werden (z.B. Protokoll-Drucker MELAprint®42, MELAflash CF-Card, Computer).

Übersicht Sterilisierprogramme

Typprüfungen	Universal- Programm	Schnell- Programm B	Schnell- Programm S	Schon- Programm	Prionen- Programm
Programmtyp gemäß DIN EN 13060	Typ B	Typ B	Typ S	Typ B	Typ B
Dynamische Druckprüfung der Sterilisierkammer	X	X	X	X	X
Luftleckage	X	X	X	X	X
Leerkammerprüfung	X	X	X	X	X
Massive Beladung	X	X	X	X	X
Poröse Teilbeladung	X			X	X
Poröse Vollbeladung	X			X	X
Einfache Hohlkörper (Hohlkörper B)	X	X	X	X	X
Produkt mit engem Lumen (Hohlkörper A)	X	X		X	X
Einfache Verpackung	X	X		X	X
Mehrfache Verpackung	X			X	X
Trocknung massive Beladung	X	X	X	X	X
Trocknung, poröse Beladung	X			X	X
X = Übereinstimmung mit allen anwendbaren Abschnitten der Norm DIN EN 13060					

Tabelle 3: Übersicht Sterilisierprogramme

Kapitel 2 – Gerätebeschreibung

In diesem Kapitel erfahren Sie

- welche Komponenten im Standard-Lieferumfang enthalten sind
- aus welchen Bauteilen der Autoklav besteht
- über welche Sicherheitsvorrichtungen der Autoklav verfügt
- wie die Bedienelemente aufgebaut sind und wie Sie diese bedienen
- wie die Menüs der Bedienoberfläche strukturiert sind
- welche Wasserversorgung der Autoklav benötigt

Lieferumfang

Standard-Lieferumfang


- Vacuklav®41 B+ oder Vacuklav®43 B+
- Benutzerhandbuch
- Technisches Handbuch
- Installations- und Aufstellungsprotokoll
- Konformitätserklärung Medizinprodukterichtlinie
- Konformitätserklärung Druckgeräte richtlinie
- Gewährleistungsurkunde
- Halterung für Tablettts oder Kassetten
- Tabletteheber
- 1 Schlauch zur Entleerung des internen Vorratstanks
- Inbusschlüssel zum Not-Öffnen der Tür
- TORX-Schlüssel zum Entfernen der Tragegurte

Als Option

- Tablettts
- Norm-Tray-Kassetten und –Heber
- MELAstore-Trays
- MELAstore-Boxen
- Zusätzliche Halterungen
- MELAflash CF-Card
- MELAflash CF-Kartenlesegerät

Geräteansichten

Vorderansicht

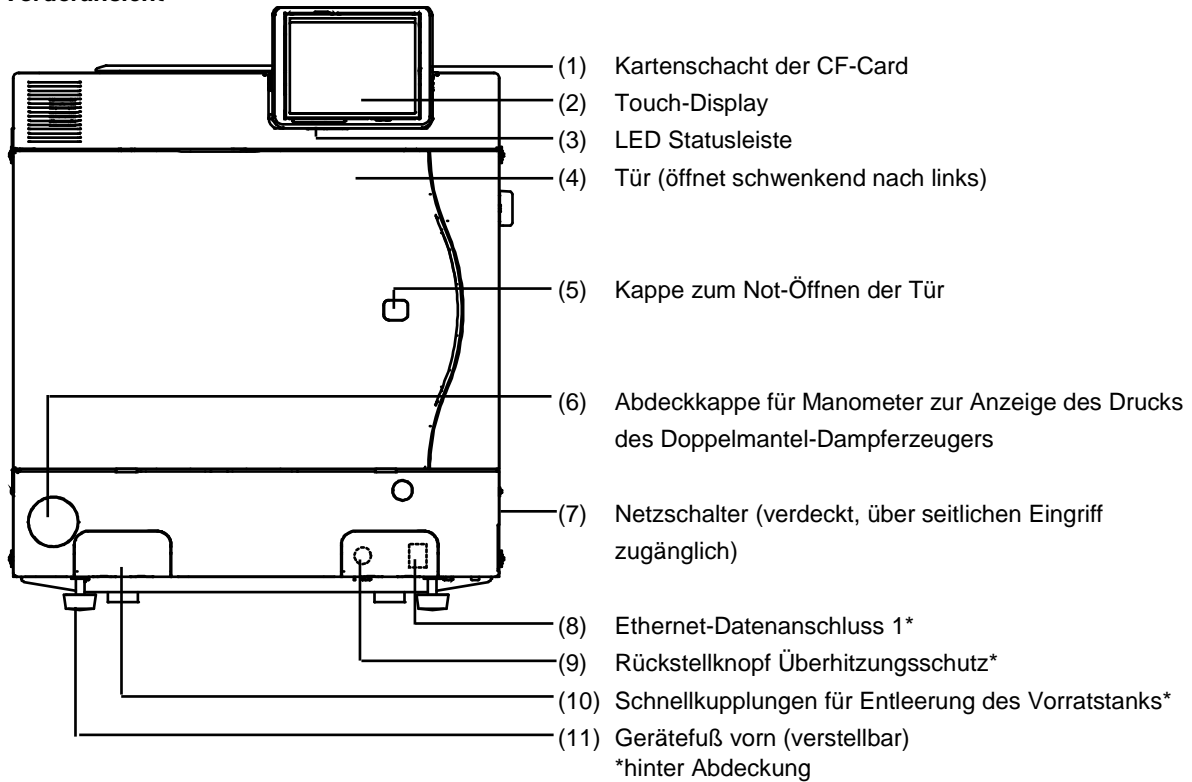

Rückansicht

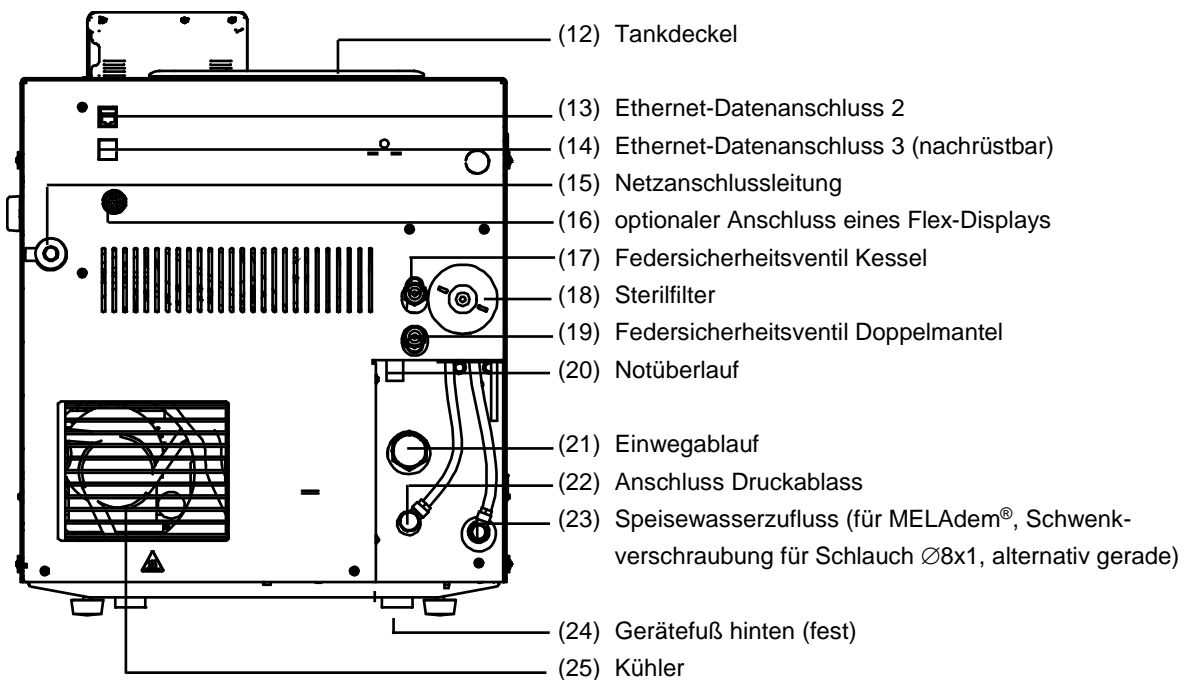


Abbildung 1: Vorder- und Rückansicht

Innenansicht

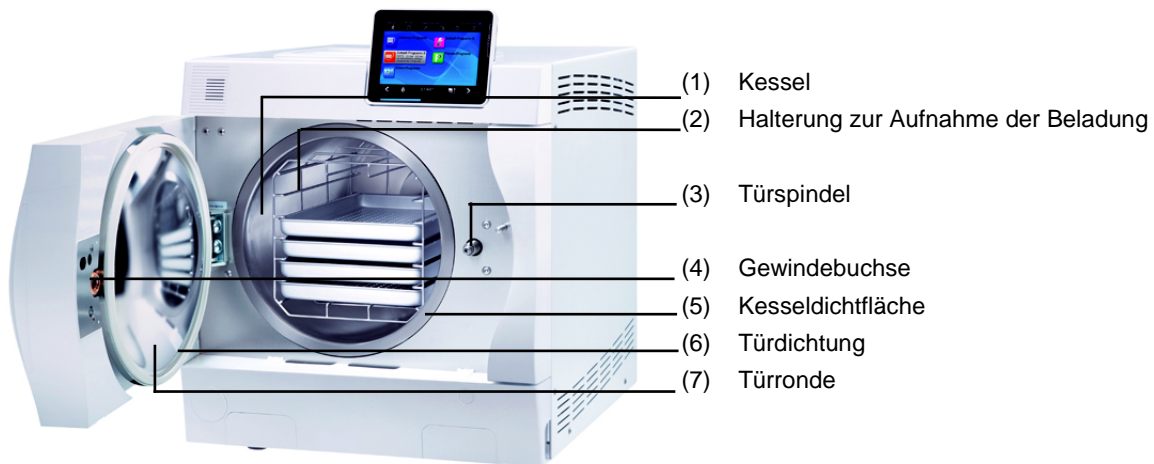


Abbildung 2: Innenansicht

Nutzraum

Die Autoklaven Vacuklav®41 B+ und Vacuklav®43 B+ unterscheiden sich nur hinsichtlich ihrer Gerätetiefe. Demzufolge sind ihre Nutzräume unterschiedlich groß.

	Durchmesser	Tiefe
Vacuklav®41 B+	25 cm	35 cm
Vacuklav®43 B+	25 cm	45 cm

Tabelle 4: Maße des Nutzraumes

Halterungen für die Beladung

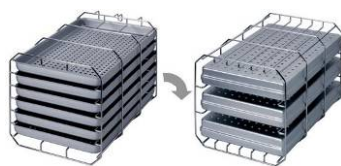


Abbildung 3: Halterung C



Abbildung 4: Halterung B



Abbildung 5: Halterung D

Der Autoklav wird immer mit einer Halterung zur Aufnahme von Tabletts oder Kassetten ausgeliefert.


Die Halterung (C) ist Standard und kann entweder sechs Tabletts oder – um 90° gedreht – drei Norm-Tray-Kassetten oder drei MELAstore-Boxen 100 aufnehmen.

Die Halterung (B) kann vier Norm-Tray-Kassetten oder vier Tabletts aufnehmen.

Die Halterung (D) kann zwei hohe Kassetten (z.B. für Implantate), zwei MELAstore-Boxen 200 oder – um 90° gedreht – vier Tabletts aufnehmen.





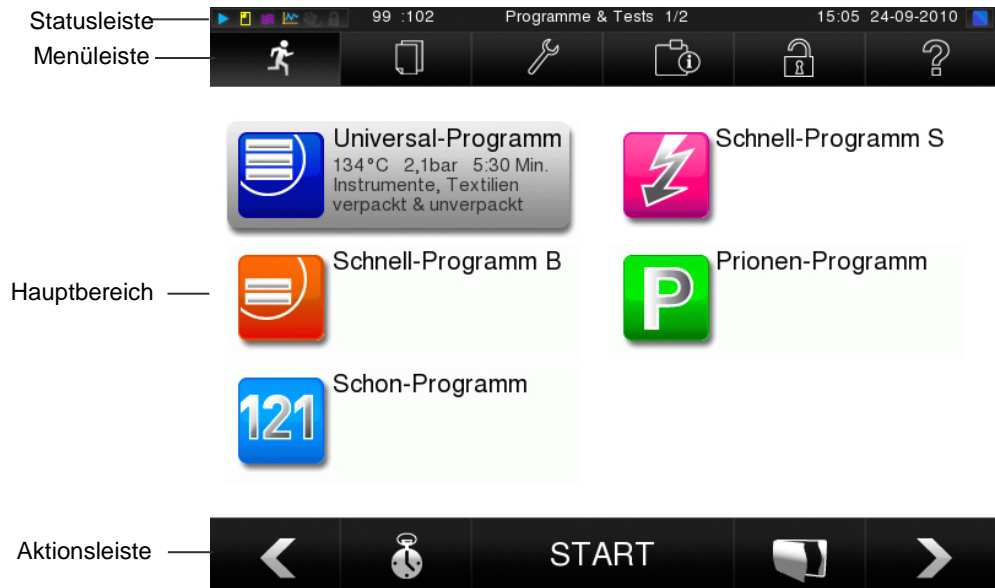



Bedienpanel

Das Bedienpanel besteht aus einem farbigen 5 Zoll Touch-Display.



Symbole in der Statusleiste	Bedeutung
Programme/Tests	zeigt an, ob ein Programm/Test läuft
Sofortausgabe	zeigt an, ob die Sofortausgabe aktiviert/deaktiviert ist
Zusatztrocknung	zeigt an, ob die Zusatztrocknung aktiviert/deaktiviert ist
Grafikprotokolle	zeigt an, ob die Aufzeichnung von Grafikprotokollen aktiviert/deaktiviert ist
Energiesparmodus	zeigt an, ob sich der Autoklav aktuell im Energiesparmodus befindet
Servicebereich	zeigt an, ob ein Service-Techniker im Servicebereich eingeloggt ist
Status CF-Card	zeigt an, ob eine CF-Card gesteckt ist und ob ein Lese- oder Schreibzugriff stattfindet.

Symbole in der Menüleiste	Bedeutung
Programme/Tests	Hier finden Sie alle Sterilisierprogramme und Tests, z.B. Vakuumtest, Bowie & Dick-Test usw.
Protokollausgabe	Hier können Sie sich die gesamte Protokoll-Liste anzeigen lassen, Protokolle eines eingegrenzten Zeitfensters, z.B. des Tages, des Monats etc. oder bestimmte Protokolltypen sowie Protokolle löschen.
Einstellungen	Hier können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, z.B. Datum und Uhrzeit, Helligkeit etc. Außerdem legen Sie einmalig die „Standard“-Protokolleinstellungen zur Protokollausgabe fest.
Info-/Statusfenster	Zeigt Informationen zu Softwareversion und Gerätedaten, z.B. Gesamtchargen, Wartungszähler, Protokolleinstellungen, Protokollspeicher und weitere technische Werte.
Servicebereich	Nur für Techniker
Hilfemenü	Gibt, abhängig vom gewählten Fenster und der Bediensituation, Hinweise zur Bedienung oder Funktion des aktuell angewählten Fensters.

<i>Symbole in der Aktionsleiste</i>		<i>Bedeutung</i>
	Tür auf	öffnet die Tür des Autoklaven
	zurück	wechselt zum vorherigen Fenster
	vor	wechselt zum nächsten Fenster
	Abbrechen/ zurück ohne Speichern	wechselt zum übergeordneten Menü, verlässt das Fenster ohne Speichern
	Zoom (+)	zeigt weitere Details, z.B. weitere Werte nach Ende eines gelaufenen Programms
	Startzeitvorwahl	wechselt in das Menü „Startzeitvorwahl“
	Löschen	löscht Protokolle aus dem internen Protokollspeicher/löscht den als Standard gespeicherten Protokoll-Drucker oder Label-Printer
	Suche	Suche nach Label-Printer(n)/Protokoll-Drucker(n)

LED Statusleiste

Die am Rand des Displays befindliche Statusleiste weist farblich auf verschiedene Situationen hin, z.B. im Standby, während eines Programmlaufes oder bei Warn- und Störungsmeldungen.

blau - Standby, Programm läuft, Trocknung hat noch nicht begonnen

grün - Trocknung läuft, Programm erfolgreich beendet.

gelb - bei Warnmeldungen, während Software-Update.

rot - bei Störungsmeldung, Programm nicht erfolgreich beendet.

Versorgung mit Speisewasser

Der Autoklav benötigt für die Dampferzeugung demineralisiertes oder destilliertes Speisewasser. Die Versorgung mit Speisewasser erfolgt entweder über den internen Vorratstank oder über eine Wasser-Aufbereitungsanlage (z.B. MELAdem®40/MELAdem® 47). Dabei saugt der Autoklav das Speisewasser selbsttätig an.

Speisewasser über internen Vorratstank

Wenn Sie den internen Vorratstank für die Speisewasserversorgung einsetzen, müssen Sie diesen von Zeit zu Zeit manuell befüllen. Verwenden Sie nur im Handel erhältliches Wasser nach DIN EN 13060, Anhang C als Speisewasser.

Interner Vorratstank

Der Vorratstank von MELAG fasst maximal 5 Liter. Diese Menge an Speisewasser reicht für bis zu 7 Sterilisationen.

Destilliergerät MELAdest®65

Sie können mit dem Destilliergerät MELAdest®65 von MELAG kostengünstig Speisewasser in der Praxis herstellen.

Speisewasser über Wasser-Aufbereitungsanlage

Eine Wasser-Aufbereitungsanlage wird an das Trinkwassernetz angeschlossen. Sie produziert das für die Dampferzeugung des Autoklaven benötigte Speisewasser. Der Speisewasseranschluss des Autoklaven wird direkt mit der Wasser-Aufbereitungsanlage verbunden.

Wenn Sie eine Wasser-Aufbereitungsanlage einsetzen, ist immer genügend Speisewasser vorhanden. Das Auffüllen des Vorratstanks entfällt. Die Wasser-Aufbereitungsanlagen MELAdem®40 und MELAdem®47 produzieren für den Autoklav die optimale Speisewasserqualität. Die Auswahl der jeweiligen Anlage richtet sich nach der Anzahl der Sterilisationen pro Tag und nach der Beladung. Jeder MELAG Autoklav kann mit einer Wasser-Aufbereitungsanlage ergänzt werden.

Wasser-Aufbereitungsanlagen MELAdem®40 und MELAdem®47



HINWEIS!

Halten Sie bitte erst Rücksprache mit der Fa. MELAG, wenn Sie Wasser-Aufbereitungsanlagen anderer Hersteller einsetzen möchten.



**Netzstecker in die
Steckdose stecken
Netzschalter einschalten**



Vorbereitungszeit



Autoklav einschalten

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Netzkabel und Netzstecker:

- Spleißen oder verändern Sie niemals das Netzkabel.
- Biegen oder verdrehen Sie niemals das Netzkabel.
- Ziehen Sie nie am Netzkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu entfernen. Fassen Sie immer direkt am Stecker an.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
- Führen Sie das Netzkabel niemals über Stellen, bei denen das Kabel eingeklemmt werden kann (z.B. Türen oder Fenster).
- Führen Sie das Netzkabel nicht entlang einer Wärmequelle.
- Verwenden Sie keine Nägel, Heftklammern oder ähnliche Objekte zum Fixieren eines Kabels.
- Sollte das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sein, setzen Sie den Autoklav außer Betrieb. Netzkabel oder Netzstecker dürfen nur durch autorisierte Personen ersetzt werden.

Bei Nichtbeachtung kann es zu einer Beschädigung am Kabel oder am Stecker und/oder zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag kommen. Schwere Verletzungen können die Folge sein.

Falls der Autoklav noch nicht ans Stromnetz angeschlossen ist, stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Schalten Sie den Autoklav am Netzschalter ein.

Nach dem Einschalten

Am Display sehen Sie das Startbild **willkommen**. Die Software des Autoklaven wird initialisiert und seine Gerätekomponenten werden überprüft. Der Wasserstand des Speisewassers im Doppelmantel-Dampferzeuger wird automatisch geprüft und wenn nötig durch den Speisevorgang (Speisepumpe läuft) sichergestellt. Das Speisewasser wird für die Dampferzeugung vorgeheizt.

Nachdem der Autoklav am Netzschalter eingeschaltet wurde, benötigt er für das einmalige Vorheizen des Doppelmantel-Dampferzeugers eine Aufheizzeit. Diese beträgt für den Normalbetrieb beim

- Vacuklav®41 B+: 9 Minuten
- Vacuklav®43 B+: 13 Minuten

Das Display zeigt nach jedem Einschalten das Programm-Menü. Es ist standardmäßig das **Universal-Programm** angewählt.

! Achtung



Geschlossene Tür



Tür schließen

Beachten Sie beim Schließen der Tür des Autoklaven folgende Hinweise:

- Drücken Sie die Tür nicht zu zaghaft an das Gehäuse des Autoklaven.
- Halten Sie die Tür für mindestens 3 Sekunden angedrückt.
- Werfen Sie die Tür auf keinen Fall mit Schwung zu.

Bei Nichtbeachtung kann die Funktionstüchtigkeit des Türverschlussmechanismus beeinträchtigt werden.

Der Autoklav verfügt über eine motorgetriebene automatische Türverriegelung mit Gewindespindel.

Um die Tür zu schließen, drücken Sie diese fest an.

Mit Start eines Programms schließt die Tür druckdicht.

Nur bei geschlossener Tür sind Eingaben am Display des Autoklaven möglich.

HINWEIS!

Lassen Sie die Tür nur zum Be- und Entladen des Autoklaven offen. Wenn Sie die Tür geschlossen halten, sparen Sie Energie.

Kapitel 3 – Erste Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erfahren Sie

- wer den Autoklav aufstellen, installieren und in Betrieb nehmen darf
- welche Voraussetzungen Sie für das Aufstellen, Installieren und die Inbetriebnahme des Autoklaven schaffen müssen
- wo Sie weitere Informationen finden

Bedingungen für das Aufstellen, Installieren und in Betrieb nehmen



- Lassen Sie den Autoklav nur von Personen aufstellen, installieren und in Betrieb nehmen, die durch MELAG autorisiert sind.
- Der Autoklav ist nach derzeit gültigen VDE-Bestimmungen nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden am Autoklav und/oder zu Verletzungen kommen.



- Der Autoklav ist für den Einsatz außerhalb der Patientenumgebung vorgesehen. Der Mindestabstand zum Behandlungsplatz muss im Radius mindestens 1,5 Meter betragen.

Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden am Autoklav und/oder zu Verletzungen kommen.

Anforderungen an den Aufstellort

Ort

Stellen Sie den Autoklav an einem trockenen und staubgeschützten Ort auf. Die Luftfeuchtigkeit sollte 30 – 60 % und die Umgebungstemperatur 16 – 26°C betragen.



- Halten Sie den vorgegebenen Abstand zu den Umgebungsflächen an den Seiten und oberhalb des Autoklaven unbedingt frei.

Nichtbeachtung kann zu einem Wärmestau führen. Dieser könnte die Funktion des Autoklaven beeinträchtigen und die Verkürzung der Lebensdauer der Vakuumpumpe und verlängerte Programmlaufzeiten zur Folge haben.

Abstand zu den Umgebungsflächen

Der Abstand zu den Umgebungsflächen muss auf beiden Seiten mindestens 5 Zentimeter und an der Rückseite 10 Zentimeter betragen. Oben sollte der Autoklav frei zugänglich sein, damit der eingebaute Vorratstank befüllt werden kann und eine gute Belüftung gewährleistet ist.

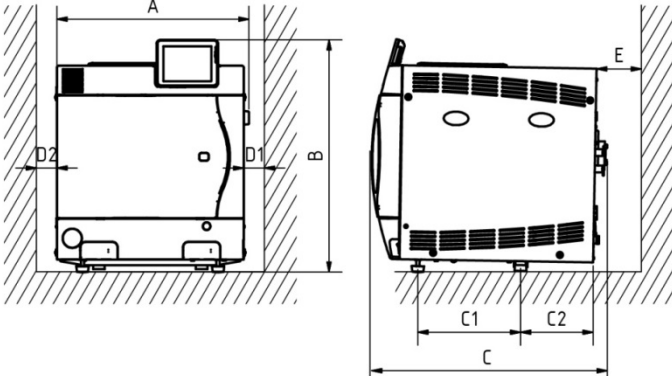
Platzbedarf			Vacuklav® 41 B+	Vacuklav® 43 B+
	Breite	A	47 cm	47 cm
	Höhe	B*	56,5 cm*	56,5 cm*
	Tiefe	C	57,5 cm	69 cm
		C ₁	25 cm	36 cm
		C ₂	18 cm	18 cm
		D ₁	5 cm	5 cm
		D ₂	14 cm	14 cm
		E	10 cm	10 cm
* beim Flex-Display beträgt B=50 cm (gemessen bis zur Oberkante des Autoklaven ohne Display)				

Tabelle 5: Platzbedarf des Autoklaven

zusätzlicher Platz für Speisewasserversorgung
Platzbedarf für Wasser-Aufbereitungsanlage

Außer für den Autoklav benötigen Sie gegebenenfalls Platz für eine Wasser-Aufbereitungsanlage zur Speisewasserversorgung.
MELAdem®40

- kann direkt am Autoklav eingehängt werden
- Aufhängung neben dem Autoklav oder ober- oder unterhalb des Autoklaven

MELAdem®47

- Anbringung neben dem Autoklav oder ober- oder unterhalb des Autoklaven (z.B. Unterschrank)

	Breite	Höhe	Tiefe	Durchmesser
MELAdem®40	32 cm	35 cm	15 cm	
MELAdem®47 Modulgehäuse	39 cm	47 cm	15 cm	
MELAdem®47 Vorratsbehälter		51 cm		24 cm

Tabelle 6: Platzbedarf MELAdem®

Anschlüsse vorsehen



■ Lassen Sie den Elektroanschluss und die Anschlüsse für Zu- und Abwasser nur von einem Fachmann einrichten.
Bei Nichtbeachtung kann es zu einem Kurzschluss und/oder Brand und/oder Wasserschaden und/oder elektrischen Schlag kommen. Schwere Verletzungen können die Folge sein.

Elektroanschluss

Sehen Sie für den Autoklav folgenden Elektroanschluss vor:

- Stromkreis mit 220 - 240 V (max. Spannungsbereich 207-253 V) und 50/60 Hz
- 16 A separate Absicherung – mindestens Automat Typ B
- FI-Schutz 30 mA
- Anschlussleistung 3400 W

Abwasserablauf

Sie können den Autoklav wahlweise über den Anschluss Druckablass (siehe Seite 8, Abbildung 1/(21)) oder über den Einwegablauf (siehe Seite 8, Abbildung 1/(22)) direkt an den Abfluss anschließen lassen. Beachten Sie hierzu die Installationshinweise im Technischen Handbuch.



HINWEIS!

Der Abwasserschlauch muss mit stetigem Gefälle sackfrei verlegt werden können.

Für Abwasserwege, die länger als zwei Meter sind, empfiehlt Ihnen die Fa. MELAG eine feste Verlegung von HT (Hochtemperatur) Rohr durch einen Installationsfachbetrieb vornehmen zu lassen.

Voraussetzungen für die erste Inbetriebnahme

Für die erste Inbetriebnahme müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Speisewasserversorgung muss gesichert sein. Zur Erstbefüllung des Dampf erzeugenden Systems benötigt der Autoklav ca. drei Liter Speisewasser.
- Die Stromversorgung des Autoklaven muss gesichert sein.
- Wenn vorhanden, sollte die MELAflash CF-Card im Kartenschacht stecken.

Installations- und Aufstellungsprotokoll



HINWEIS!

Als Nachweis für eine ordnungsgemäße Aufstellung, Installation und Erstinbetriebnahme und für Ihren Anspruch auf Gewährleistung ist das Aufstellungsprotokoll von der verantwortlichen Person auszufüllen und eine Kopie an die Fa. MELAG zu schicken.

Kapitel 4 – Sterilisieren

In diesem Kapitel erfahren Sie

- welche Voraussetzungen Sie für eine reibungslose Sterilisation schaffen müssen
- was Sie bei der Vorbereitung des Sterilisiergutes beachten sollten
- wie Sie den Autoklav richtig beladen
- welche Programme Sie wofür einsetzen
- wie Sie ein Programm starten
- welche Phasen ein Programm durchläuft
- wie Sie ein Programm abbrechen
- woran Sie erkennen, dass die Sterilisation erfolgreich beendet ist
- was Sie tun können, um die Trocknungsergebnisse zu verbessern
- was Sie beim Entnehmen des Sterilgutes beachten müssen

Voraussetzungen schaffen

Sie schaffen die Voraussetzungen für einen reibungslosen Sterilisierablauf wie folgt:

Speisewasser bereit stellen

- Wenn Sie den internen Vorratstank für die Speisewasser-Versorgung verwenden, kontrollieren Sie den Füllstand des Speisewassertanks (rechte Seite) und füllen Sie ggf. frisches Speisewasser bis zur MAX-Marke auf.
- Wenn Sie eine Wasser-Aufbereitungsanlage, z.B. MELAdem®40, MELAdem®47, verwenden und der Wasserzulauf geschlossen ist, drehen Sie diesen auf. Sollte der Vorratsbehälter der MELAdem®47 leer sein, drehen Sie den Wasserzulaufhahn mindestens eine Stunde vor der Sterilisation auf.

Einschalten

- Wenn der Autoklav noch nicht eingeschaltet ist, schalten Sie ihn am Netzschalter ein. (Siehe dazu ab Seite 13, **Autoklav einschalten und Nach dem Einschalten**).

CF-Card stecken

- Falls Sie die CF-Card als Ausgabemedium für Protokolle nutzen möchten und die MELAflash CF-Card noch nicht gesteckt ist, stecken Sie diese in den Kartenschacht (siehe Seite 30, **CF-Card als Ausgabemedium**).

Herstellerempfehlung für den täglichen Routinebetrieb

Beachten Sie die Herstellerempfehlung von MELAG zum Routinebetrieb von Klasse-B-Autoklaven.

Sterilisiergut vorbereiten

Wesentliche Voraussetzung für die sichere Desinfektion und Sterilisation von Sterilisiergut ist die sachgemäße Reinigung und Pflege des Sterilisiergutes nach Herstellerangaben. Außerdem sind verwendete Materialien, Reinigungsmittel und Aufbereitungsverfahren von Bedeutung.

HINWEIS!

Sterilisieren Sie Textilien und Instrumente möglichst getrennt voneinander in separaten Sterilisierbehältern oder Sterilisierverpackungen.



Textilien



Beachten Sie bei der Aufbereitung von Textilien und beim Verbringen der Textilien in Sterilisierbehälter Folgendes:

- Befolgen Sie die Anweisungen der Textilhersteller zur Aufbereitung und Sterilisation und beachten Sie relevante Normen und Richtlinien z.B. von RKI und DGSV.
- Richten Sie die Falten der Textilien parallel zueinander aus.
- Stapeln Sie die Textilien möglichst senkrecht und nicht zu eng in die Sterilisierbehälter, damit sich Strömungskanäle bilden können.
- Wenn sich Textilkpakete nicht zusammen halten lassen, schlagen Sie die Textilien in Sterilisierpapier ein.
- Sterilisieren Sie nur trockene Textilien.
- Die Textilien dürfen keinen direkten Kontakt zu Boden und Wänden der Sterilisierkammer haben, sie saugen sich sonst mit Kondensat voll.

Bei Nichtbeachtung kann die Dampfdurchdringung des Wäschepaketes behindert werden und/oder Sie erhalten schlechte Trocknungsergebnisse. Die Textilien könnten nicht sterilisiert werden, was eine Gefährdung der Gesundheit der Patienten und des Praxisteams zur Folge haben kann.

Instrumente



Beachten Sie bei der Aufbereitung von gebrauchten und fabrikneuen Instrumenten Folgendes:

- Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen der Instrumentenhersteller zur Aufbereitung und Sterilisation und beachten Sie die relevanten Normen und Richtlinien z.B. von BGV A1, RKI und DGSV.
- Reinigen Sie die Instrumente sehr gründlich, z.B. mit Hilfe eines Reinigungs- und Desinfektionsgerätes.
- Spülen Sie die Instrumente zum Abschluss der Desinfektion und Reinigung mit demineralisiertem oder destilliertem Wasser und trocknen Sie die Instrumente danach mit einem sauberen, nicht fuselndem Tuch gründlich ab.
- Setzen Sie nur Pflegemittel ein, die für die Dampfsterilisation geeignet sind. Fragen Sie beim Hersteller des Pflegemittels nach.

Bei Nichtbeachtung können sich eventuell vorhandene Schmutzreste während der Sterilisation unter dem Dampfdruck lösen. Reste von Desinfektions- und Reinigungsmitteln führen zu Korrosion. Erhöhter Wartungsbedarf und die Beeinträchtigung der Funktion des Autoklaven können die Folge sein.

Ungeeignete Pflegemittel, z.B. Wasser abweisende Pflegemittel oder dampfundurchlässige Öle, können unsterile Instrumente zur Folge haben. Das gefährdet Ihre Gesundheit und die Gesundheit Ihrer Patienten. Beachten Sie beim Einsatz folgender Geräte unbedingt die Aufbereitungshinweise der Instrumentenhersteller. MELAG empfiehlt Ihnen für die Desinfektion und Reinigung von Instrumenten die Benutzung von Hilfsmitteln wie z.B.:

- Ultraschallgeräte
- Pflegegeräte für Hand- und Winkelstücke
- Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

Autoklav beladen

Nur wenn der Autoklav richtig beladen ist, kann die Sterilisation wirksam sein und die Trocknung gute Ergebnisse liefern.



HINWEIS!

Stellen Sie Tablettts oder Kassetten nur mit der zugehörigen Halterung in den Kessel.

Verwenden Sie perforierte Tablettts, wie z.B. die Tablettts von MELAG. Nur so kann Kondensat ablaufen. Wenn Sie geschlossene Unterlagen oder Halbschalen für die Aufnahme des Sterilisiergutes einsetzen, sind schlechte Trocknungsergebnisse die Folge. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Tray-Einlagen aus Papier u.U. ebenfalls zu schlechteren Trocknungsergebnissen führen kann.

Verpackungen

Die richtige Anwendung geeigneter Verpackungen ist für den Erfolg der Sterilisation von Bedeutung.



Verwenden Sie nur Verpackungsmaterialien und -systeme, welche die Norm DIN EN 868 erfüllen.

Sie können wiederverwendbare starre Verpackungen wie z.B. Norm-Tray-Kassetten oder weiche Verpackungen wie z.B. Klarsicht-Sterilisierverpackungen, Papierbeutel, Sterilisierpapier, Textilien, Vlies verwenden.

Geschlossene Sterilisierbehälter

Verwenden Sie Sterilisierbehälter aus Aluminium. Aluminium leitet und speichert Wärme gut und beschleunigt somit die Trocknung. Beachten Sie bei der Verwendung von geschlossenen Sterilisierbehältern zur Aufnahme von Sterilisiergut Folgendes:



- Geschlossene Sterilisierbehälter müssen mindestens an einer Seite perforiert oder mit Ventilen ausgerüstet sein.
- Bei einseitig perforierten Sterilisierbehältern sollte die Perforierung möglichst oben sein, wie z.B. bei den MELAstore-Boxen.

Nichtbeachtung führt zu ungenügender Dampfdurchdringung, die Sterilisation könnte erfolglos sein. Außerdem wird der Kondensatablauf verhindert, schlechte Trocknungsergebnisse sind die Folge. Das kann letztlich zu unsterilen Instrumenten und damit zur Gefährdung der Gesundheit der Patienten und des Praxisteams führen.

Sterilisierbehälter stapeln

Die Sterilisierbehälter von MELAG erfüllen alle Anforderungen für eine erfolgreiche Sterilisation und Trocknung.

Stapeln Sie, wenn möglich, nur Sterilisierbehälter gleicher Grundfläche, bei denen das Kondensat seitlich an den Wänden ablaufen kann, übereinander.



- Achten Sie darauf, dass Sie beim Stapeln der Sterilisierbehälter die Perforation nicht abdecken.

Bei Nichtbeachtung kann das abtropfende Kondensat nicht bis zum Kesselboden ablaufen. Es würde unten befindliches Sterilisiergut durchnässen. Schlechte Trocknungsergebnisse sind die Folge. Das kann letztlich zu unsterilen Instrumenten und damit zur Gefährdung der Gesundheit der Patienten und des Praxisteams führen.

Weiche Sterilisierverpackung

Weiche Sterilisierverpackungen können sowohl in Sterilisierbehältern als auch auf Tablett sterilisiert werden. Beachten Sie bei der Verwendung von weichen Sterilisierverpackungen, wie z.B. MELAfo®, Folgendes:



- Ordnen Sie weiche Sterilisierverpackungen senkrecht stehend und in geringem Abstand zueinander an.
- Legen Sie nicht mehrere weiche Sterilisierverpackungen flach übereinander auf ein Tablett oder in einen Behälter.
- Wenn die Siegelnaht während der Sterilisation aufreißt, ist evtl. eine zu kleine Verpackung der Grund. Ist dies nicht der Fall, verpacken Sie die Instrumente neu und sterilisieren Sie diese noch einmal.
- Sollte die Siegelnaht während der Sterilisation aufreißen, verlängern Sie den Siegelimpuls am Foliensiegelgerät oder siegeln Sie eine Doppelnaht.

Nichtbeachtung kann letztlich zu unsterilen Instrumenten und damit zur Gefährdung der Gesundheit von Patienten und Praxisteam führen.

Mehrfachverpackung

Der Autoklav arbeitet mit fraktioniertem Vakuumverfahren. Dieses ermöglicht die Verwendung von Mehrfachverpackungen.

Gemischte Beladungen

Beachten Sie für die Sterilisation von gemischten Beladungen Folgendes:

- Textilien immer nach oben
- Sterilisierbehälter nach unten
- Klarsicht-Sterilisierverpackungen und Papierverpackungen nach oben – Ausnahme: in der Kombination mit Textilien nach unten
- Klarsicht-Sterilisierverpackungen möglichst hochkant und, wenn das nicht möglich ist, mit der Papierseite nach unten zeigend

	Vacuklav® 41 B+		Vacuklav® 43 B+	
	Instrumente	Textilien	Instrumente	Textilien
Höchstmasse je Einzelteil	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg
Beladevarianten Halterung C ¹⁾	max. 6 Tablett, Tiefe 290 mm max. 3 Sterilisierbehälter 15 K max. 3 Sterilisierbehälter 15M max. 2 Sterilisierbehälter 15G max. 3 Sterilisierbehälter 17K max. 3 Tupfertrommeln 17R max. 2 Tupfertrommeln 23R max. 2 Sterilisierbehälter 28M max. 1 Sterilisierbehälter 28G max. 3 Norm-Tray-Kassetten		max. 6 Tablett, Tiefe 420 mm max. 6 Sterilisierbehälter 15 K max. 3 Sterilisierbehälter 15M max. 2 Sterilisierbehälter 15G max. 6 Sterilisierbehälter 17K max. 3 Sterilisierbehälter 17M max. 1 Sterilisierbehälter 17G max. 3 Tupfertrommeln 17R max. 2 Sterilisierbehälter 23M max. 1 Sterilisierbehälter 23G max. 2 Tupfertrommeln 23R max. 2 Sterilisierbehälter 28M max. 1 Sterilisierbehälter 28G max. 3 Norm-Tray-Kassetten	
Maximale Gesamtmasse	6 kg	2 kg	7 kg	2,5 kg
Max. Gesamtmasse bei Verwendung von MELAstore ²⁾	9 kg			

1) Halterungen, Tablett, Sterilisierbehälter, Norm-Tray-Kassetten von MELAG siehe **Anhang A**.

2) Andere Beladungskonfigurationen nach Validierung vor Ort

Tabelle 7: Beladevarianten, Beispiel Halterung C, und maximale Beladung

Programm auswählen






Sie wählen das Sterilisierprogramm danach aus, ob und wie das Sterilisiergut verpackt ist. Außerdem müssen Sie die Temperatur-beständigkeit des Sterilisiergutes beachten.

Alle Sterilisier- und Zusatzprogramme werden im Menü **Programme & Tests** angezeigt.

Den folgenden Tabellen können Sie entnehmen, für welches Sterilisiergut Sie welches Programm einsetzen und welche Zusatzprogramme Ihnen außerdem zur Verfügung stehen.

	Universal-Programm	Schnell-Programm B	Schnell-Programm S	Schon-Programm	Prionen-Programm
Sterilisiertemperatur	134 °C	134 °C	134 °C	121 °C	134 °C
Sterilisierdruck	2,1 bar	2,1 bar	2,1 bar	1,1 bar	2,1 bar
Sterilisierzeit	5:30 Min.	5:30 Min.	3:30 Min.	20:30 Min.	20:30 Min.
Betriebszeit*	ca. 21 Min.	ca. 14 Min.	ca. 10 Min.	ca. 36 Min.	ca. 38 Min.
Trocknung	12 Min.	6 Min.	2 Min.	12 Min.	12 Min.

*) ohne Trocknung (bei Vollbeladung) und abhängig von Beladung und Aufstellbedingungen (wie z.B. Netzspannung)

Programme		Verpackung	Besonders geeignet für	Beladung 41 B+/43 B+	Beladung mit MELAstore
Universal-Programm		einfach und mehrfach verpackt	gemischte Beladungen; lange, englumige Hohlkörper	6kg/7kg	9 kg
Schnell-Programm B		einfach verpackte und unverpackte Instrumente (keine Textilien)	lange englumige Hohlkörper-Instrumente	einfach verpackt max. 1,5 kg ----- unverpackt. 6 kg/7 kg	--
Schnell-Programm S		nur unverpackt (keine Textilien)	einfache massive Instrumente; Übertragungsinstrumente; einfache Hohlkörper	6 kg/7 kg	--
Schon-Programm		einfach und mehrfach verpackt	größere Mengen Textilien; Thermolabiles Gut (z.B. Kunststoff, Gummiartikel)	Textilien 2 kg (41B+) 2,5 kg (43B+) ----- Thermolab. Gut 6 kg/7 kg	9 kg
Prionen-Programm		einfach und mehrfach verpackt	Instrumente, bei denen eine Infektionsgefahr durch krankhaft veränderte Eiweiße vermutet wird (z.B. Creutzfeld-Jacob, BSE)	6kg/7kg	9 kg





Zusatzprogramme	Verwendung/Funktion
Vakuumtest 	Zur Messung der Leckrate, Test bei trockenem und kaltem Gerät (Test ohne Beladung)
Bowie & Dick-Test 	Dampfdurchdringungstest mit speziellem Testpaket (erhältlich im Fachhandel)
Leitwertmessung 	Zur manuellen Messung der Qualität des Speisewassers
Entleerung 	Zur Entleerung und Druckentlastung des Doppelmantel-Dampferzeugers, z.B. im Servicefall, bei der Wartung oder vor einem Transport

Tabelle 8: Übersicht Einsatzgebiete der Sterilisierprogramme






Die programspezifischen Trocknungszeiten gewährleisten bei einer Beladung wie in diesem Kapitel beschrieben (siehe Seite 20, **Autoklav beladen**), eine sehr gute Trocknung des Sterilgutes. Für schwierige Trocknungsaufgaben können Sie im Menü **Einstellungen** über die Option **Zusatztrocknung** die Trocknungszeit eines Programms um 50% verlängern.

HINWEIS!

Sie können die Zusatztrocknung auch nachträglich während eines laufenden Programms im Menü **Einstellungen** aktivieren.



Mithilfe der Funktion Startzeitvorwahl ist es möglich, ein beliebiges Programm zu wählen und zu einem selbst bestimmten Zeitpunkt zu starten.

- Dazu drücken Sie nach Wahl des Programmes das Symbol  in der Aktionsleiste. Das Display wechselt zum Bild "Startzeitvorwahl".
- Um z.B. die Zeit zu ändern, tippen Sie direkt auf den Parameter Stunde oder Minute. Das ausgewählte Feld wird hellblau markiert dargestellt.
- Sie können die Zeit nun durch Drücken der Schaltflächen  und  ändern.
- Drücken Sie abschließend auf START. Das Display bleibt danach in dem Displaybild „Startzeitvorwahl“.

HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass die Funktion Startzeitvorwahl für das Schnell-Programm S aufgrund der Sicherheitsabfrage nicht möglich ist.

Nach dem Beginn der Startzeitvorwahl kann außer dem Menü **Info & status** kein anderes Menü mehr angewählt werden.

Die Startzeitvorwahl ist nur für die einmalige Zeit- und Programmwahl aktiv, d.h. nach Ablauf des Programmes erlischt die Startzeitvorwahl. Sie können den Autoklav ausschalten, während die Startzeitvorwahl läuft. Jedoch muss der Autoklav rechtzeitig vor Ablauf des Timers wieder eingeschaltet werden.

! Achtung

- Der unbeaufsichtigte Betrieb elektrischer Geräte, also auch dieses Autoklaven, erfolgt auf eigenes Risiko. Für eventuell auftretende Schäden durch den unbeaufsichtigten Betrieb übernimmt die Firma MELAG keine Haftung.



Programm starten

Wenn Sie ein Programm ausgewählt haben, wird es markiert dargestellt. Sie können es nun durch Drücken auf START starten. Mit dem Start des Programms schließt die Tür druckdicht. Der Autoklav prüft die Menge des Speisewassers und dessen Leitwert. Beim Start des Schnell-Programms S erscheint, gekoppelt mit einem akustischen Signal, ein Warnhinweis. Mit dem Schnell-Programm S dürfen ausschließlich unverpackte Instrumente sterilisiert werden. Wenn die Beladung ausschließlich unverpackte Instrumente enthält, bestätigen Sie mit JA um das Programm zu starten.



Entlüftungsphase

Sterilisierphase

Trocknungsphase



Programmlauf am Computer verfolgen

Sie können den aktuellen Fortschritt eines laufenden Sterilisierprogramms an jedem Computer des Praxis-Netzwerks über die im Autoklav integrierte Website in einem Webbrowser verfolgen. Voraussetzung ist, dass für den Autoklav eine IP-Adresse vergeben wurde und er in das Praxis-Netzwerk eingebunden ist:

- Öffnen Sie ein Webbrowser-Fenster (empfohlen wird Mozilla Firefox oder Internet Explorer).
- Tragen Sie die IP-Adresse des Autoklaven am Praxis-PC in die Adresszeile des Webbrowsers ein, z.B. 192.168.57.41 und bestätigen Sie mit „Enter“.

Jetzt können Sie sich den Programmlauf oder Informationen zu Ihrem Autoklav wie z.B. Seriennummer, Gerätesoftware-Version und ausgewähl-

te Werte anzeigen lassen.



Manueller Programmabbruch



Sie können ein laufendes Programm in allen Phasen abbrechen.

- Beachten Sie, dass beim Öffnen der Tür nach einem Programmabbruch, in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Programmabbruchs, heißer Wasserdampf austreten kann.
- Verwenden Sie zur Entnahme der Tablettis einen Tabletteheber. Berühren Sie nie mit ungeschützten Händen das Sterilgut, den Kessel oder die Tür. Die Teile sind heiß.

Bei Nichtbeachtung können Verbrennungen die Folge sein.

Für einen Programmabbruch drücken Sie auf ABBRUCH und bestätigen mit JA.

Nach kurzer Zeit können Sie, wie auf dem Display angezeigt, die Tür

durch Drücken des Türsymbols  öffnen.

Beenden Sie ein Programm vor Beginn der Trocknung, ist das Sterilisiergut weiterhin unsteril.

Es erscheint ein Warnhinweis auf dem Display. Im Protokoll wird die Sterilisation als **NICHT erfolgreich** vermerkt.

Manueller Abbruch vor Beginn der Trocknung



Manueller Abbruch während der Trocknung



In der Trocknungsphase können Sie das Programm über die Schaltfläche STOPP abbrechen, ohne dass der Autoklav einen Fehler meldet.

Sie müssen dann, vor allem bei verpacktem Sterilgut, mit einer unzureichenden Trocknung rechnen. Für eine sterile Lagerung ist eine ausreichende Trocknung Voraussetzung. Deswegen lassen Sie, wenn möglich, Programme mit verpacktem Sterilgut bis zum Ende der Trocknung durchlaufen.

In einem Schnellprogramm sterilisierte unverpackte Instrumente trocknen nach der Entnahme aufgrund ihrer Eigenwärme.



**Sterilisation
nicht erfolgreich beendet
Abbruch durch das System**

**Trocknungsergebnisse ver-
bessern**

**Protokollkopf am
Display anschauen**

**automatische
Protokollausgabe**

Sterilisierphase ist beendet

Von weitem können Sie am Display erkennen, ob die Sterilisierphase schon erfolgreich abgeschlossen ist.

Sobald die Trocknungsphase eingeleitet wird, wechselt sowohl der farbige Ring als auch die LED Statusleiste von blau zu grün.

Die Sterilisation ist nicht erfolgreich, wenn sie durch den Bediener oder, bei Auftreten eines Fehlers, durch das System abgebrochen wird. Der Doppelmantel wird beim Abbruch durch das System in einen drucklosen Zustand gebracht. Deswegen dauert ein Systemabbruch länger als der Abbruch durch den Bediener.

Trocknungsphase


Der Autoklav bietet eine sehr gute Trocknung des Sterilisiergutes. Falls es für schwierige Trocknungsaufgaben doch einmal notwendig sein sollte, können Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um die Trocknung weiter zu verbessern:

- Beladen Sie den Autoklav trocknungsgerecht. Stellen Sie z.B. Klar-sicht-Sterilisier- und Papierverpackungen karteikartenartig auf. Beachten Sie dazu Abschnitt **Autoklav beladen** auf Seite 20. Benutzen Sie gegebenenfalls den optionalen Folienhalter.
- Aktivieren Sie die Funktion Zusatztrocknung. Beachten Sie dazu den Abschnitt **Zusatztrocknung** auf Seite 23.

Programm ist beendet

Am Ende eines Programms wird der Kesseldruck dem Umgebungsdruck angeglichen. Wenn das Programm erfolgreich beendet wurde, erscheint eine entsprechende Mitteilung auf dem Display.

Bevor Sie die Tür öffnen, können Sie sich weitere Werte zum soeben beendeten Programm, z.B. die Plateauzeit, den Leitwert etc. am Display

durch Drücken des Lupensymbols  anschauen.

Ist im Menü **Einstellungen** unter **Protokollierung** die automatische Protokollausgabe nach Programmende aktiviert, wird das Protokoll des gelaufenen Programms nach dem Öffnen der Tür an die aktivierten Ausgabemedien ausgegeben (siehe Seite 29, **Kapitel 5 – Protokollieren**).



Freigabeprozess

Gemäß RKI - „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ endet die Aufbereitung von Instrumenten mit der dokumentierten Freigabe zur Lagerung und Anwendung des Sterilguts. Der Freigabeprozess besteht aus der Chargenindikation und der Chargenfreigabe und muss durch autorisiertes und sachkundiges Personal erfolgen.

Chargenindikation

umfasst die Überprüfung der im Sterilisierprogramm mitgeführten Indikatoren, z.B. MELAcontrol®/ MELAcontrol® Pro.

Nur bei einem vollständigen Farbumschlag der Indikatorstreifen kann die Freigabe der Indikatoren erfolgen.

Chargenfreigabe

umfasst die Überprüfung der Prozessparameter anhand des Sterilisierungsergebnisses am Autoklav und des Sterilisierprotokolls sowie die Überprüfung der einzelnen Verpackungen auf Beschädigungen und Restfeuchtigkeit.

Auf dem Sterilisierprotokoll wird die Freigabe der Charge und der evtl. mitgeführten Indikatoren dokumentiert.

Je nach Einstellung in der Benutzerverwaltung ist zur Freigabe des Sterilgutes eine Benutzer-PIN der Person, die die Charge und die Indikatoren freigibt, notwendig.

Sterilgut entnehmen

Nach dem Ende eines Programms beachten Sie bei der Entnahme des Sterilgutes Folgendes:



- Öffnen Sie nie gewaltsam die Tür. Der Autoklav könnte beschädigt werden und/oder es könnte heißer Dampf austreten.
- Verwenden Sie zur Entnahme der Tablettts einen Tablettheber.
- Berühren Sie nie mit ungeschützten Händen das Sterilgut, den Kessel oder die Innenseite der Tür. Die Teile sind heiß.

Bei Nichtbeachtung können Verbrennungen die Folge sein.



- Kontrollieren Sie die Verpackung des Sterilgutes bei der Entnahme aus dem Autoklav auf Beschädigungen.
- Sollte eine Verpackung beschädigt sein, verpacken Sie das Sterilgut neu und sterilisieren es noch einmal.

Nichtbeachtung kann unsterile Instrumente zur Folge haben. Das gefährdet die Gesundheit der Patienten und des Praxisteam.

Kondensatrückstände am Sterilgut

Wenn Sie das Sterilgut direkt nach Programmende aus dem Autoklav nehmen, kann es vorkommen, dass sich geringe Mengen Feuchtigkeit auf dem Sterilgut befinden.

Laut dem Arbeitskreis für Instrumentenaufbereitung (AKI; Rote Broschüre; 10. Auflage; S.57) gilt:

„Als tolerierbare Restfeuchte werden – in der Praxis – einzelne Wassertropfen (keine Pfützen) angesehen, die innerhalb 15 Minuten abgetrocknet sein müssen.“

Sterilgut lagern

Verwenden Sie ausschließlich normkonforme Verpackungen für das Sterilgut. Lagern Sie Sterilgut nicht im Aufbereitungsraum. Beachten Sie für die Lagerung von Sterilgut DIN 58953, Teil 7 und die unten aufgeführten Kriterien.

Lagerbedingungen

- staubgeschützt z.B. im geschlossenen Instrumentenschrank
- geschützt vor Beschädigung auf glatten Flächen
- geschützt vor zu großen Temperaturschwankungen
- geschützt vor Feuchtigkeit (z.B. Alkohol, Desinfektionsmittel)
- Lagerdauer entsprechend der Verpackungsart

Lagerzeit

Die maximale Lagerfähigkeit ist von der Verpackung und den Lagerbedingungen abhängig. Sie beträgt bei normkonform verpacktem Sterilgut – staubgeschützte Lagerung vorausgesetzt – bis zu sechs Monate.

Kapitel 5 – Protokollieren

In diesem Kapitel erfahren Sie

- warum und wie Sie Chargen dokumentieren
- welche Ausgabemedien Sie wie für die Chargendokumentation nutzen können
- wo Sie die Protokolle für die Chargendokumentation finden
- wie Sie die Protokolle richtig lesen
- wie Sie Datum und Uhrzeit am Autoklav einstellen

Chargendokumentation

Die Chargendokumentation ist als Nachweis für den erfolgreich abgelaufenen Sterilisierprozess und als verpflichtende Maßnahme der Qualitätssicherung unerlässlich.

Im internen Protokollspeicher des Autoklaven werden die Daten, wie z.B. Programmtyp, Charge und Prozessparameter aller gelaufenen Programme abgelegt.

Für die Chargendokumentation können Sie den internen Protokollspeicher auslesen und die Daten an verschiedene Ausgabemedien übertragen lassen. Das kann sofort nach jedem gelaufenen Programm oder nachträglich, z.B. am Ende eines Praxistages, erfolgen.

Ausgabemedien

Sie haben die Möglichkeit, die Protokolle der gelaufenen Programme an folgende Ausgabemedien auszugeben und entsprechend zu archivieren.

- MELAflash CF-Card
- Computer (über das Netzwerk)
- Protokoll-Drucker MELAprint®42

Sie können die Ausgabemedien beliebig kombinieren. So ist es z.B. möglich, Protokolle auf der MELAflash CF-Card zu speichern und zusätzlich drucken zu lassen.

Die Ausgabe der Protokolle auf mehrere aktivierte Medien erfolgt nacheinander. Sie wählen die gewünschten Ausgabemedien, indem Sie diese einmalig im Menü **Einstellungen** → **Protokollierung** oder im Menü **Protokolle** für die nachträgliche Protokollausgabe auswählen.

Detaillierte Hinweise zum Aktivieren und Einstellen der Protokollausgabe finden Sie in **Kapitel 6 – Einstellungen**.

Auslieferungszustand

Im Auslieferungszustand des Autoklaven ist die MELAflash CF-Card als Ausgabemedium für Text- und Grafikprotokolle und somit die automatische Protokollausgabe (siehe S. 31) aktiviert.

Kapazität des internen Protokollspeichers

Die Kapazität des internen Speichers reicht für ca. 100 Protokolle.

Ist der interne Protokollspeicher fast voll und mindestens ein Protokoll noch nicht auf ein aktiviertes Ausgabemedium ausgegeben, erscheint der Warnhinweis **Interner Protokollspeicher fast voll** auf dem Display. Wenn dieser Warnhinweis erscheint, sollten Sie die im Menü **Einstellungen** → **Protokollierung** festgelegten Ausgabemedien bereitstellen und die betreffenden Protokolle ausgeben (Menü **Protokolle**).

Kurz danach wird die Meldung **Interner Speicher voll** angezeigt. Dann haben Sie letztmalig die Chance, noch nicht ausgegebene Protokolle zu archivieren (Meldung mit JA bestätigen), bevor die Daten im Protokollspeicher des Autoklaven bis auf die letzten 40 Protokolle automatisch gelöscht werden.

! Achtung

CF-Card als Ausgabemedium

Beachten Sie für den Einsatz einer CF-Card folgende Hinweise:
Schieben Sie die CF-Card nie gewaltsam in den Kartenschacht.

Ziehen Sie die CF-Card nie während des Schreib- und Lesezugriffs aus dem Kartenschacht. Beim Schreibzugriff leuchtet in der rechten oberen Ecke des Displays ein gelbes Quadrat auf.

Bei Nichtbeachtung können Datenverluste, die Beschädigung der Karte und/oder des Autoklaven und/oder dessen Software auftreten. Die Karte kann unbrauchbar werden.

CF-Card als Ausgabemedium

CF-Card einstecken



Wenn keine CF-Card im Kartenschacht steckt, diese aber aktiviert ist, erscheint ein Warnhinweis auf dem Display.

Wenn Sie also die CF-Card als Ausgabemedium nutzen möchten, muss diese, sofern noch nicht geschehen, in den Kartenschacht eingesetzt werden.

Wenn Sie im Moment keine CF-Card zur Hand haben, können Sie die Protokolle später über das Menü **Protokolle** ausgeben.

Der Kartenschacht für die CF-Card befindet sich an der rechten Seite des Display-Gehäuses.

Um die CF-Card einzusetzen, schieben Sie sie mit der fühlbaren Griffkante nach rechts hinten zeigend vollständig in den Kartenschacht. Wenn die CF-Card richtig eingesetzt ist, leuchtet ein blaues Quadrat in der rechten oberen Ecke des Displays.


HINWEIS!

Aufgrund des größeren Speicherbedarfs bei der Aufzeichnung von Grafikprotokollen in Echtzeit wird empfohlen, ausschließlich *MELAflash* CF-Cards mit 1GB oder mehr Speichervolumen von MELAG zu verwenden. Sie erhalten diese in geprüftem und formatiertem Zustand. Es ist bekannt, dass einige ältere CF-Cards mit bis zu 256 MB Speichervolumen Dateiprobleme verursachen können.

PC als Ausgabemedium verwenden

Sie können einen Computer direkt oder über ein (Praxis-)Netzwerk an den Autoklav anschließen. Voraussetzung ist, dass der PC über eine Netzwerkkarte mit RJ45-Buchse (LAN) verfügt. Die Protokollierung erfolgt entweder über eine FTP- oder eine TCP-Verbindung. Für ersteren Fall wird auf dem Computer ein FTP-Server (Kommunikations-Programm) oder ein FTP-Dienst benötigt. Für die Protokollausgabe über TCP wird zusätzlich ein geeignetes Programm, z.B. *MELAtace* benötigt.

Drucker anschließen

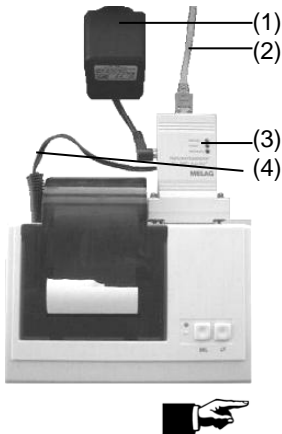

Protokoll-Drucker als Ausgabemedium

Wenn Sie den Protokoll-Drucker MELAprint®42 als Ausgabemedium verwenden möchten, schließen Sie diesen wie folgt an den Autoklaven an:

- Stecken Sie das Netzteil (1) in die Steckdose.
- Verbinden Sie den MELAG-Netzwerkadapter (3) über das mitgelieferte Kabel (2) mit einer Ethernet-Datenanschlussstelle des Autoklaven.
- Stecken Sie den MELAG-Netzwerkadapter (3) in den seriellen Anschluss des Protokoll-Druckers MELAprint®42 (verschraubbar).
- Stecken Sie Kabel (4) des Adapters (3) in die Stromversorgungsbuchse des Protokoll-Druckers.
- Autoklav einschalten.
- Mit Stecken des Netzteilkabels (1) in die Stromversorgungsbuchse des Netzwerkadapters (3) wird der Protokoll-Drucker eingeschaltet.
- Stellen Sie den Protokoll-Drucker am Autoklav als Ausgabemedium ein (siehe S. 38, **Kapitel 6 – Einstellungen**).

HINWEIS!

Nähere Informationen zum Protokoll-Drucker (z. B. zur Dauer der Lesbarkeit der Protokoll-Ausdrucke finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanweisung.

Label-Printer als Ausgabemedium

Der Einsatz des Label-Printers MELAprint 60 ermöglicht die Rückverfolgbarkeit der Charge: Mit Angabe von Sterilisierdatum, Lagerdauer, Chargennummer, der Benutzer-ID der Person, die die Instrumente zur Anwendung freigegeben hat, des verwendeten Autoklaven sowie des Dateinamens können auf einfache Weise die sterilisierten Instrumente dem Patienten und der Sterilisationscharge zugeordnet werden. Die einwandfreien Verpackungen mit dem Sterilgut werden nach der Sterilisation durch Aufbringen eines Etiketts gekennzeichnet. Damit sind die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße „Freigabe“ durch die mit der Aufbereitung betraute Person erfüllt.

In der Patientenakte können somit alle Informationen über den korrekten Sterilisationsablauf den verwendeten Instrumenten zugeordnet werden.

HINWEIS!

Nähere Informationen zum Label-Printer MELAprint 60 (z. B. zur Dauer der Lesbarkeit der Etiketten) finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanweisung.

Ausgabe der Textprotokolle

Voraussetzungen für die automatische Ausgabe der Textprotokolle sofort nach Programmende

Protokolle sofort automatisch ausgeben

Wenn Sie sofort nach dem Ende eines Programms das zugehörige Textprotokoll automatisch auf ein Ausgabemedium ausgeben möchten, nutzen Sie die automatische Protokollausgabe mit Sofortausgabe. Im Auslieferungszustand ist der Autoklav auf die automatische Protokollausgabe sowohl der Text- als auch der Grafikprotokolle über die CF-Card sofort nach Programmende eingestellt.

Folgende Voraussetzungen müssen für die Ausgabe von Textprotokollen sofort nach Ende eines Programms erfüllt sein:

- Im Menü **Einstellungen** → **Protokollierung** ist die Sofortausgabe aktiviert.
- Im Menü **Einstellungen** → **Protokollierung** ist mindestens ein Ausgabemedium angewählt.
- Das aktivierte Ausgabemedium ist angeschlossen (z.B. Computer,


Protokoll-Drucker MELAprint® 42) bzw. gesteckt (MELAflash CF-Card).

Im Menü **Einstellungen** → **Protokollierung** werden Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung der automatischen Protokollausgabe geführt. Ist es für die automatische Protokollausgabe nicht möglich, ein Protokoll auszugeben, z.B. weil das aktivierte Ausgabemedium nicht angeschlossen ist, erscheint ein Warnhinweis. Der Autoklav registriert für jedes aktivierte Ausgabemedium noch nicht ausgegebene Protokolle. Er bietet die Ausgabe dieser Protokolle bei der nächsten Gelegenheit an.

MELAG empfiehlt Ihnen, die automatische Protokollausgabe mit einer sofortigen Ausgabe der Protokolle (gemäß dem Auslieferungszustand) zu nutzen.

Folgende Voraussetzungen müssen für die Aufzeichnung von Grafik-Protokollen in Echtzeit erfüllt sein:

- Im Menü **Einstellungen** → **Protokollierung** muss die Ausgabe der **Grafikprotokolle** aktiviert sein.
- Mindestens eines der gewählten Ausgabemedien stimmt mit einem Ausgabemedium für die Textprotokolle überein.
- Das aktivierte Ausgabemedium ist angeschlossen (Computer) bzw. gesteckt (MELAflash CF-Card).

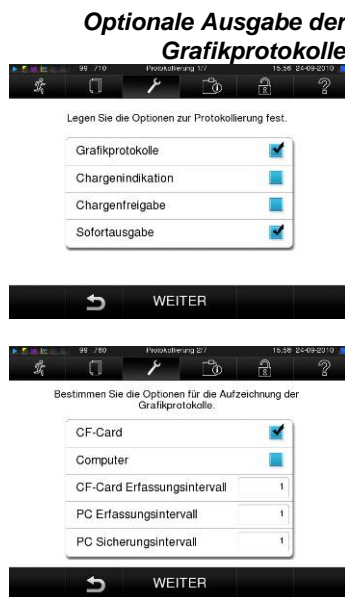

Erläuterung zu den Einstellmöglichkeiten für die Grafik-Aufzeichnung:

CF-Card (CFC) Erfassungsintervall in Sek. – gibt an, in welchen Zeitintervallen die Programmkurve auf der CF-Card aufgezeichnet wird. Je kleiner das Zeitintervall, desto genauer die Kurve. Im Beispiel ist das Zeitintervall auf 1 Sekunde eingestellt.

PC Erfassungsintervall in Sek. – gibt an, in welchen Zeitintervallen die Programmkurve aufgezeichnet wird, wenn der Computer als Ausgabemedium gewählt ist. Je kleiner das Zeitintervall, desto genauer die Kurve. Im Beispiel ist das Zeitintervall auf 1 Sekunde eingestellt.

PC Sicherungsintervall in Sek. – gibt an, in welchen Zeitabständen die Grafikdaten vom Autoklav auf dem Computer gespeichert werden. Im Beispiel ist 1 Sekunde als Sicherungsintervall eingestellt.

HINWEIS!

Grafikprotokolle können nicht im internen Protokollspeicher gespeichert werden. Wenn Sie zu den Textprotokollen optional Grafikprotokolle aufzeichnen möchten, ist stets darauf zu achten, dass mindestens ein gemeinsames Ausgabemedium für die Ausgabe von Text- und Grafikprotokollen eingestellt ist. D.h. es muss mindestens der Computer oder die CF-Card als Ausgabemedium für beide Protokolltypen übereinstimmen.

Gespeicherte Protokolle nachträglich ausgeben

Über das Menü **Protokolle** haben Sie die Möglichkeit, Textprotokolle nachträglich und unabhängig vom Zeitpunkt eines Programmendes auszugeben.

Dabei können Sie die Ausgabemedien selbst bestimmen. Standardmäßig sind die Ausgabemedien vorausgewählt, die auch unter **Einstellungen** → **Protokollierung** ausgewählt sind, sofern die automatische Sofortausgabe aktiviert ist.

Hier folgt ein Beispiel, wie Sie die Sofortausgabe deaktivieren und z.B. alle Textprotokolle der gelaufenen Programme einer gesamten Woche ausgeben können:

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen** → **Protokollierung**.
- Entfernen Sie den Haken neben Sofortausgabe, um diese zu deaktivieren. Danach wird das System neu gestartet.

**Sofortausgabe
deaktivieren**



Beispiel: Alle gespeicherten Protokolle auf CF-Card ausgeben



Möglichkeiten der Protokollausgabe


- Wählen Sie das Menü **Protokolle**.
- Navigieren Sie zu **Protokolle der Woche**.
- Drücken Sie **WEITER**.
- Drücken Sie anschließend auf **AUSGABE**, um das (die) Protokoll(e) auszugeben.

Im nachfolgenden Beispiel lesen Sie, wie Sie alle gespeicherten Protokolle auf CF-Card ausgeben. Voraussetzung ist, dass die CF-Card im Kartenschacht steckt.

- Wählen Sie das Menü **Protokolle**.
- Wählen Sie **Alle Protokolle** und wählen anschließend **WEITER**, um ein Ausgabemedium festzulegen.
- Drücken Sie abschließend auf **AUSGABE**, um alle Protokolle auszugeben.

In der Auswahlliste des Menüs **Protokolle** (siehe Beispiel oben) werden verschiedene Möglichkeiten der Protokollausgabe angeboten. Nachfolgend einige Beispiele:

Menü „Protokolle“	Datei-Endung	Erklärung
Protokoll-Liste		Alle im Speicher vorhandenen Programmprotokolle werden am Display angezeigt. Sie können die Liste durch Drücken der Spaltenüberschriften nach Nr., Datum, Uhrzeit, Programm und Ergebnis sortieren.
Letztes Protokoll	.PRO	Das Protokoll des zuletzt erfolgreich gelaufenen Programms wird ausgegeben.
Protokolle des Tages	.PRO	Die Protokolle der erfolgreich gelaufenen Programme des aktuellen Tages werden ausgegeben.
Protokolle der Woche	.PRO	Die Protokolle der erfolgreich gelaufenen Programme der Woche – Montag bis Sonntag – werden ausgegeben.
Protokolle des Monats	.PRO	Die Protokolle der erfolgreich gelaufenen Programme des aktuellen Monats werden ausgegeben.
Alle Protokolle	.PRO	Protokolle aller erfolgreich gelaufenen Programme werden ausgegeben.
Letztes Störprotokoll	.STR	Das letzte Störprotokoll wird ausgegeben.
Störprotokolle des Tages	.STR	Die Störprotokolle des aktuellen Tages werden ausgegeben.
usw.		...
Legendenprotokoll	.LEG	Enthält eine Erklärung aller im Protokoll enthaltenen Abkürzungen.
Statusprotokoll	.STA	Eine Zusammenfassung aller wichtigen Einstellungen und Systemzustände (Zähler, Messwerte usw.)
Störung im Standby	.STB	Dieser Protokolltyp wird erzeugt, wenn Störungen aufgetreten sind, ohne dass ein Programm lief.
Systemprotokoll	.LOG	Eine Art Logbuch, das eine Auflistung aller aufgetretenen Störungen und Änderungen am System in zeitlicher Reihenfolge enthält.
Alle Protokolle löschen		Löscht alle im internen Protokollspeicher abgelegten Protokolle. !Achtung! Es werden auch Protokolle gelöscht, die zuvor noch nicht auf ein anderes Ausgabemedium ausgegeben wurden.

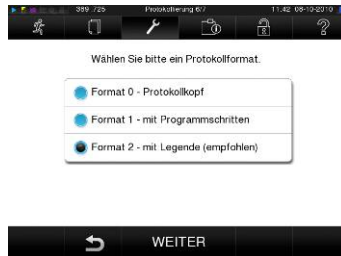

Format für Programmprotokolle festlegen

Zu jedem gelaufenen Programm wird im internen Protokollspeicher ein Protokoll abgelegt. Über das Protokollformat legen Sie fest, welche der abgelegten Daten ausgegeben werden sollen. Sie können dabei zwischen einer Kurzform (0), einer mittleren Form (1) und einer Langform (2) wählen.

Das Standard-Format ist die Langform 2.

Sie legen das Ausgabeformat für die Programmprotokolle unter **Ein- stellungen** → **Protokollierung** fest.

		Protokollformat		
Bestandteil		0	1	2
Kopf		X	X	X
Werte zu den Pro-grammschritten			X	X
Legende				X

<pre> 10 01100EDPEN !1 A10RS7JV.PRO ----- 10 MELAG Vacuklav 41-B ----- 15 Programm: Universal-Programm 20 Programmtyp: 134 °C verpackt 25 Datum: 24.04.2013 30 Tagescharge: 05 Gesamt: 09787 35 Benutzer: deaktiviert 36 Indikatoren umgeschlagen: Ja 37 Charge freigegeben: Ja ===== 40 Universal-Programm erfolgreich beendet 42 = = ===== 45 Temperatur: 135.5 +0.09/-0.10 °C 50 Druck: 2.17 +0.01/-0.01 bar 55 Plateauzeit: 05 min 30 s 60 Leitwert: 10 µS/cm (380:0.0) 65 Startzeit: 16:23:49 70 Endezeit: 16:51:15 (27:26 min) ===== 80 SN:201041-B1000 ===== 81 MR V3.053 19.04.2013 82 Para V3.054 04.02.2013 83 BO V3.170 19.04.2013 ----- Step Zeit t[m:s] P[mbar] T[°C] SP-S 0:01 0:01 1017 76.6 SK11 0:13 0:12 1631 85.9 SK12 0:36 0:23 1296 104.3 SK11 0:42 0:06 1622 105.7 SK12 1:05 0:23 1295 108.8 SK21 1:11 0:06 1632 109.4 SK22 1:34 0:23 1294 109.9 SK21 1:40 0:06 1647 110.7 SK22 2:04 0:24 1294 110.1 SK21 2:10 0:06 1636 110.8 SK22 2:33 0:23 1295 110.3 SF12 2:53 0:20 499 101.7 SF13 3:23 0:30 1634 111.7 SF21 3:31 0:08 1293 110.6 SF22 4:20 0:49 180 101.4 SF23 5:02 0:42 1799 114.6 SF31 5:11 0:09 1289 111.0 SF32 6:01 0:50 200 100.8 SF33 6:45 0:44 1905 116.3 SF41 6:56 0:11 1293 110.6 SF42 7:28 0:32 400 105.1 SF43 7:52 0:24 1745 112.9 SH01 8:34 0:42 2739 130.0 SH02 8:55 0:21 2846 131.7 SS01 9:20 0:25 3070 134.1 SS02 14:50 5:30 3178 135.6 SA00 15:19 0:29 1293 112.4 ST01 18:15 2:56 85 90.2 ST02 18:17 0:02 170 90.2 ST03 21:12 2:55 80 88.5 ST02 21:15 0:03 166 88.5 ST03 24:10 2:55 76 87.4 ST02 24:12 0:02 166 87.5 ST03 27:07 2:55 75 87.7 SB10 27:20 0:13 801 90.7 SB20 27:23 0:03 926 91.5 SP-E 27:23 0:00 932 91.5 >> Code in folgender Zeile nie ändern << C200000500F8020D82E9280A03F2034031943490 >> Echtheitsnachweis Chargenprotokoll << ----- 0.00 0.0 0.0 0.0 --- 0.0 -edk---etm---etd---etp---etv---ett-ENDE </pre>	<pre> Programmstart Konditionierung Typ 1 (Dampfeinlass) Konditionierung Typ 1 (Druckablass) Konditionierung Typ 1 (Dampfeinlass) Konditionierung Typ 1 (Druckablass) Konditionierung Typ 2 (Dampfeinlass) Konditionierung Typ 2 (Druckablass) Konditionierung Typ 2 (Dampfeinlass) Konditionierung Typ 2 (Druckablass) Konditionierung Typ 2 (Dampfeinlass) Konditionierung Typ 2 (Druckablass) Konditionierung Typ 2 (Dampfeinlass) Konditionierung Typ 2 (Druckablass) 1. Fraktionierung Evakuieren 1. Fraktionierung Dampfeinlass 2. Fraktionierung Druckablass 2. Fraktionierung Evakuieren 2. Fraktionierung Dampfeinlass 3. Fraktionierung Druckablass 3. Fraktionierung Evakuieren 3. Fraktionierung Dampfeinlass 4. Fraktionierung Druckablass 4. Fraktionierung Evakuieren 4. Fraktionierung Dampfeinlass Halten Dampfeinlass Halten Regeln Sterilisation Eintritt Sterilisation Druckablass Trocknen: 1. Vakuum-Trocknung Trocknen: Belüftungs-Trocknung Trocknen: 2. Vakuum-Trocknung Trocknen: Belüftungs-Trocknung Trocknen: 2. Vakuum-Trocknung Trocknen: Belüftungs-Trocknung Trocknen: 2. Vakuum-Trocknung Belüften 1 Belüften 2 Ende </pre>	Standard-Format		
--	---	-----------------	--	--

Tabelle 9: Protokollformate und deren Bestandteile

Protokolle richtig lesen


Kopf	<p>Der Kopf wird in allen drei wählbaren Protokollformaten ausgegeben. Das Format 0 beinhaltet nur den Kopf eines Protokolls.</p> <p>Der Kopf des Programmprotokolls umfasst die Zeilen 10 bis 83 und beinhaltet die wichtigsten Informationen zum gelaufenen Programm, wie z.B., ob das Programm erfolgreich beendet wurde.</p>
Werte der Programmschritte	<p>Während des Programms werden unter anderem die Zeit, der Druck und die Temperatur erfasst. Diese Werte werden ausgegeben, wenn Sie das Programmformat 1 oder 2 wählen.</p>
Legende	<p>Die Legende ist Bestandteil des umfangreichsten Protokollformates 2. Sie dient der Kennzeichnung der Programmschritte, auf die sich die angegebenen Werte beziehen.</p> <p>In digital ausgegebenen Protokollen (CF-Card, PC) befindet sich die Legende direkt neben den Werten des jeweiligen Programmschrittes. Jede Legendenzeile bezieht sich dabei auf die links neben ihr stehende Zeile.</p> <p>Bei Protokollen, die über den Protokoll-Drucker MELAprint®42 ausgegeben werden, befindet sich die entsprechende Legendenzeile immer unterhalb der Zeile, auf die sie sich bezieht.</p>

<pre> ----- !0 01100EDPEN !1 A10RS7JV.PRO ----- 10 MELAG Vacuklav 41-B ----- 15 Programm: Universal-Programm 20 Programmtyp: 134 °C verpackt 25 Datum: 24.04.2013 30 Tagescharge: 05 Gesamt: 09787 35 Benutzer: deaktiviert 36 Indikatoren umgeschlagen: Ja 37 Charge freigegeben: Ja ===== 40 Universal-Programm erfolgreich beendet 42 = = ===== 45 Temperatur: 135.5 +0.09/-0.10 °C 50 Druck: 2.17 +0.01/-0.01 bar 55 Plateauzeit: 05 min 30 s 60 Leitwert: 10 µS/cm (380:0.0) 65 Startzeit: 16:23:49 70 Endezeit: 16:51:15 (27:26 min) ===== 80 SN:201040-B4001 ===== 81 MR V3.053 19.04.2013 82 Para V3.054 04.02.2013 83 BO V3.170 19.04.2013 ----- Step Zeit t[m:s] P[mbar] T[°C] SP-S 0:01 0:01 1017 76.6 SK11 0:13 0:12 1631 85.9 SK12 0:36 0:23 1296 104.3 SK11 0:42 0:06 1622 105.7 SK12 1:05 0:23 1295 108.8 . . SF32 6:01 0:50 200 100.8 SF33 6:45 0:44 1905 116.3 SF41 6:56 0:11 1293 110.6 SF42 7:28 0:32 400 105.1 SF43 7:52 0:24 1745 112.9 SH01 8:34 0:42 2739 130.0 SH02 8:55 0:21 2846 131.7 SS01 9:20 0:25 3070 134.1 SS02 14:50 5:30 3178 135.6 SA00 15:19 0:29 1293 112.4 ST01 18:15 2:56 85 90.2 ST02 18:17 0:02 170 90.2 ST03 21:12 2:55 80 88.5 ST02 21:15 0:03 166 88.5 ST03 24:10 2:55 76 87.4 ST02 24:12 0:02 166 87.5 ST03 27:07 2:55 75 87.7 SB10 27:20 0:13 801 90.7 SB20 27:23 0:03 926 91.5 SP-E 27:23 0:00 932 91.5 >> Code in folgender Zeile nie ändern << C200000500F8020D82E9280A03F2034031943490 >> Echtheitsnachweis Chargenprotokoll << ----- 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -edk----etm---etd---etp---etv---ett-ENDE- </pre>	<p>Kopf</p> <p>!0 Ident-Nummer !1 Dateiname</p> <p>10 Typ des Autoklaven</p> <p>15 Programmname 20 Sterilisierparameter des Programms 25 Datum 30 Tages- und Gesamtchargennummer 35 Benutzer-ID 36 Chargenindikation } Freigabeprozess 37 Chargenfreigabe }</p> <p>40 Kontrollmeldung 42 Warn- oder Störungsmeldung bei Programmabbruch</p> <p>45 Sterilisiertemperatur mit max. Abweichungen 50 Sterilisierdruck mit max. Abweichungen 55 Sterilisierzeit 60 Leitwert des Speisewassers 65 Uhrzeit bei Start des Programms 70 Uhrzeit bei Ende des Programms</p> <p>80 Seriennummer des Autoklaven</p> <p>81 aktuelle Version der Geräte-Firmware 82 aktuelle Version der Geräte-Parameter 83 Aktuelle Version der Bedienoberfläche</p> <p>Werte der Programmschritte und Legende</p> <p>Zeit Zeit (Minuten: Sekunden), die seit dem Start des Programms vergangen ist</p> <p>t Dauer (Minuten: Sekunden), welche ein Programmschritt in Anspruch nimmt</p> <p>P Druck in der Kammer in Millibar [mbar]</p> <p>T[°C] Temperatur in der Kammer in Grad Celsius</p> <p>Zu Beginn der einzelnen Zeilen stehen Kürzel, welche auf die Art des jeweiligen Programmschrittes hinweisen. Eine Auflistung aller Schrittkürzel erhalten Sie, wenn Sie über das Menü Protokolle ein Legendenprotokoll ausgeben.</p> <p>Programmschritte:</p> <p>SK Konditionierung SF Fraktionierung SH Halten SS Sterilisation SA Druckablass ST Trocknen SB Belüften SP-E Ende</p> <p>Echtheitsnachweis (elektronische Signatur) Sollte nie verändert werden; die Entschlüsselung des Codes durch MELAG lässt einen Rückschluss zu, ob die Daten auf einem Autoklav von MELAG erstellt und verändert worden sind.</p> <p>Hier werden Sensormesswerte im Fall einer Störung angezeigt. Die Werte sind für den Techniker hilfreich.</p>
---	--

Tabelle 10: Beispiel eines Programmprotokolls für ein erfolgreich beendetetes Universal-Programm

Verzeichnisnamen, Protokollnamen

Unterverzeichnisse

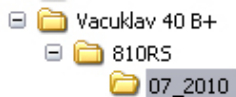

Protokollausgabe

Protokollausgabe auf CF-Card Protokollausgabe auf einem Computer



Mehrfachausgabe von Protokollen

Protokolle finden

Nach einer Protokollausgabe finden Sie auf den Speichermedien CF-Card bzw. Computer ein Verzeichnis.

Der Name dieses Verzeichnisses besteht aus fünf Zeichen, z.B. 810RS. Diese Zeichen verschlüsseln die Seriennummer Ihres Autoklaven. Deswegen wird das Verzeichnis auch Geräteverzeichnis genannt.

Ein Geräteverzeichnis hat Unterverzeichnisse, die nach den Monaten der Protokollerzeugung benannt sind, z.B. 07_2010.

In den Unterverzeichnissen finden Sie alle im betreffenden Monat erzeugten Protokolle. Jeder Protokollname beginnt, wie das Geräteverzeichnis, mit den fünf Zeichen der verschlüsselten Seriennummer (z.B. 810RS).

Der Autoklav prüft bei jeder Protokollausgabe das Ausgabemedium. Wenn noch nicht vorhanden, legt der Autoklav automatisch ein Geräteverzeichnis mit der verschlüsselten Seriennummer und ein untergeordnetes Monatsverzeichnis an.

Auf der CF-Card wird das Geräteverzeichnis direkt, also ohne ein übergeordnetes Verzeichnis angelegt.

Wenn Sie die Protokolle auf einem Computer ausgeben, wird das Geräteverzeichnis in dem Verzeichnis angelegt, welches im FTP-Server-Programm festgelegt ist. Bei sehr einfachen FTP-Servern ist das der Ordner, in dem sich das FTP-Server-Programm selbst befindet.

Bei der Ausgabe über TCP und z.B. MELAtrace/MELAvue bestimmen Sie direkt im Programm den Ablageordner.

HINWEIS!

Benennen Sie die Verzeichnisse möglichst nicht um. Der Autoklav würde erneut ein Verzeichnis erzeugen, weil er das bereits vorhandene nicht mehr erkennt. Es lägen Protokolle sowohl im umbenannten Verzeichnis, als auch im erneut vom Autoklaven erzeugten Verzeichnis.

Sollten Sie Protokolle mehrfach auf dasselbe Ausgabemedium ausgeben, wird im Geräteverzeichnis ein Unterverzeichnis mit dem Namen **Doppel** angelegt.

Kapitel 6 – Einstellungen

In diesem Kapitel erfahren Sie

- welche Einstellungen Sie vornehmen können
- wie Sie vorgegebene Einstellungen ändern können





Zeitumstellung beachten



Datum und Uhrzeit einstellen

Für eine einwandfreie Chargendokumentation müssen Datum und Uhrzeit des Autoklaven richtig eingestellt sein. Beachten Sie die Zeitumstellung im Herbst und im Frühjahr, da dies nicht automatisch erfolgt. Einmal eingestellt, ist die Uhr des Autoklaven sehr genau. Stellen Sie Datum und Uhrzeit wie nachfolgend beschrieben ein:

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- Navigieren Sie bis zu **Datum & Uhrzeit**.
- Das Display wechselt zum Fenster **Datum & Uhrzeit**.
- Wählen Sie direkt den Parameter, den Sie ändern möchten (Tag, Monat, Jahr bzw. Stunde, Minute, Sekunde). Der markierte Parameter wird hellblau dargestellt.
- Ändern Sie über die Schaltflächen  und  den jeweiligen Parameterwert.
- Wiederholen Sie die Schritte für alle Parameter, die Sie ändern möchten.
- Bestätigen Sie die Änderungen mit **SPEICHERN**.
- Das Display wird nach dem Speichern neu gestartet und wechselt dann automatisch in das Menü **Programme & Tests**.



Einen neuen Benutzer anlegen/bearbeiten



Benutzerverwaltung

Für eine zuverlässige Rückverfolgbarkeit über den Freigabeprozess nach Ende eines Sterilisationsprogrammes kann für jeden Benutzer eine individuelle ID und PIN vergeben werden, mit der sich der Benutzer authentifizieren kann, bevor sie/er die Charge freigibt.

Ob eine Authentifizierung des Benutzers durch die PIN-Eingabe nötig ist, können Sie im Fenster **Benutzerverwaltung** durch Setzen des Hakens bei **Freigabeprozess mit PIN** festlegen.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Benutzer-ID und das Ergebnis des Freigabeprozesses im Protokollkopf dokumentiert.

Wie Sie einen neuen Benutzer anlegen, lesen Sie im Folgenden:

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- Navigieren Sie zu **Benutzerverwaltung**.
- Um in das Menü **Benutzerverwaltung** zu gelangen und dort Einstellungen vornehmen zu können, ist die Eingabe der Admin PIN notwendig. Geben Sie die Admin PIN (Standard: 1000) ein und bestätigen Sie mit **LOGIN**.
- Das Display wechselt zum Fenster **Benutzerverwaltung**.
- Drücken Sie die Schaltfläche **weiter zur Benutzerliste**, um sich die Benutzerliste anzeigen zu lassen.



Admin-PIN ändern



Einen Benutzer aus der Liste löschen

- Um jetzt einen neuen Benutzer anzulegen, wählen Sie eine freie ID aus und wählen **BEARBEITEN**. Beachten Sie, dass die erste ID für die Admin-PIN vorbehalten ist.
- Geben Sie eine 4-stellige PIN für die ausgewählte Benutzer-ID in das rechte Tastenfeld ein und bestätigen Sie mit **SPEICHERN**.
- Mit **SPEICHERN** übernehmen Sie alle Einstellungen und verlassen das Menü.
- Durch Drücken des Symbols verlassen Sie das Menü.

Die Admin-PIN (Standard: 1000) lässt sich wie jede andere Benutzer-PIN auf dieselbe Weise bearbeiten und sollte nach Auslieferung geändert werden.

HINWEIS!

Sollten Sie die Admin PIN vergessen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler/MELAG Kundendienst.

Wie Sie einen Benutzer aus der Benutzerliste löschen, lesen Sie im Folgenden:

- Wählen Sie das Menü **Benutzerverwaltung** wie oben beschrieben, aus und öffnen Sie die Benutzerliste.
- Wählen Sie die Benutzer-ID, die Sie löschen möchten.
- Wählen Sie das Symbol , um diesen Benutzer zu löschen. Es folgt ein Warnhinweis. Wenn Sie den Warnhinweis mit JA bestätigen, wird die PIN-Nummer dieser ID auf „0“ gesetzt.

Es kann jederzeit wieder eine neue PIN für diese Benutzer-ID vergeben werden.



Protokoll-Drucker als Standarddrucker einrichten

Wenn Sie Sterilisierprotokolle über den Protokoll-Drucker ausgeben möchten, müssen Sie diesen einmalig am Autoklav einrichten.

Wie Sie einen Protokoll-Drucker einrichten, lesen Sie im Folgenden:

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- Navigieren Sie zu **Protokoll-Drucker**. Das Display wechselt zum Fenster **Protokoll-Drucker**.



Wenn zuvor noch kein Protokoll-Drucker eingerichtet wurde, ist das Feld „IP-Adresse“ und „MAC-Adresse“ leer.

- Wählen Sie **SUCHEN**, um alle im Praxis-Netzwerk angeschlossenen und verfügbaren Protokoll-Drucker in der Liste anzeigen zu lassen. Das Fenster wechselt in die Druckerliste.
- Wenn ein oder mehrere Protokoll-Drucker im Praxis-Netzwerk verfügbar sind, werden diese in der Druckerliste angezeigt.
- Wählen Sie den gewünschten Protokoll-Drucker aus der Liste aus und bestätigen Sie mit **SPEICHERN**.


Das Display wechselt wieder zum Fenster „Protokoll-Drucker“.

- Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.
- Wählen Sie abschließend im Menü **Einstellungen** → **Protokollierung** den Protokoll-Drucker für die Protokollausgabe aus.





HINWEIS!

Wenn der gesuchte Protokoll-Drucker in der Druckerliste nicht angezeigt wird, können Sie die Suche durch Drücken des Druckersymbols  wiederholen.



Label-Printer als Standarddrucker einrichten


Wie Sie einen Label-Printer einrichten, lesen Sie im Folgenden:

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- Navigieren Sie zu **Label-Printer**. Das Display wechselt zum Fenster **Label-Printer**.
- Verfahren Sie in den weiteren Schritten, wie im vorherigen Abschnitt **Protokoll-Drucker** beschrieben.
- Wählen Sie abschließend im Menü **Einstellungen** → **Protokollierung** den Label-Printer für die Protokollausgabe aus.

HINWEIS!

Damit eine mit einem Etikett gekennzeichnete Verpackung im Nachhinein leicht einer bestimmten Charge zugeordnet werden kann, dürfen die Dateinamen der Sterilisierprotokolle auf keinen Fall umbenannt werden.

Legende zum Etikettendruck

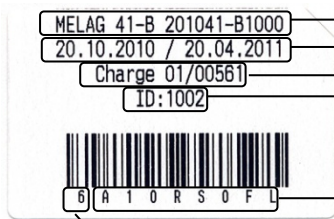

- Typ, Seriennummer
- Sterilisierdatum / Verfallsdatum
- Tagecharge / Gesamtchargeten
- Benutzer-ID (siehe Seite 38, **Benutzerverwaltung**)
- Dateiname
- Lagerdauer



Wasserversorgung

Je nachdem, ob die Speisewasser-Versorgung aus dem internen Vorratstank erfolgen soll oder Sie eine Wasser-Aufbereitungsanlage angeschlossen haben, wählen Sie am Display die entsprechende Einstellung:

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- Navigieren Sie zu **Geräte-Einstellungen** → **Wasserversorgung**. Das Display wechselt zum Fenster **Wasserversorgung**.
- Wählen Sie **INTERN**, wenn die Versorgung über den internen Vorratstank erfolgt bzw. **EXTERN**, wenn Sie eine Wasser-Aufbereitungsanlage angeschlossen haben.
- Bestätigen Sie mit **SPEICHERN**.



Energiesparmodus

Soll der Autoklav bei längeren Betriebspausen nicht ausgeschaltet werden, kann er im Energiesparmodus betrieben werden. So wird die Zeit verkürzt, die der Autoklav benötigt, um den Doppelmantel-Dampferzeuger nach dem Ausschalten wieder auf die benötigte Starttemperatur vorzuheizen.

Im Energiesparmodus können zwei Wartezeiten eingestellt werden:

Wartezeit 1 (W1): Nach einer voreingestellten Wartezeit von 15 Minuten wird die Temperatur des Doppelmantel-Dampferzeugers auf 103°C abgesenkt. Die Programmlaufzeit verlängert sich beim nächsten Start um ca. 2 Minuten.

Wartezeit (W2): Nach einer voreingestellten Wartezeit von 60 Minuten wird der Doppelmantel-Dampferzeuger nicht mehr beheizt. Dementsprechend verlängert sich die Programmlaufzeit beim nächsten Start in Abhängigkeit von der Länge der Betriebspause um ca. 5 Minuten, da der Doppelmantel-Dampferzeuger erst wieder auf die benötigte Starttemperatur vorgeheizt wird.

Wie Sie den Energiesparmodus einrichten, lesen Sie im Folgenden:

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- Navigieren Sie zu **Energiesparmodus**. Das Display wechselt zum Fenster **Energiesparmodus**.
- Verfahren Sie in den weiteren Schritten analog zum Abschnitt **Datum und Uhrzeit einstellen**.



Screensaver

Um das Display im Standby-Betrieb zu schonen, kann ein Screensaver aktiviert werden, der eine fortlaufende Diashow mit einer beliebigen Auswahl an Bildern abspielt.

Um den Screensaver zu aktivieren und Bilder für die Diashow auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- Navigieren Sie zu **screensaver**. Das Display wechselt zum Fenster **Screensaver**.
- Um ein Bild auszuwählen, tippen Sie auf das entsprechende Bild. Der weiße Rahmen um das Bild zeigt, welches Bild gerade ausgewählt ist.
- Durch nochmaliges Tippen auf das Bild wird es für die Diashow an- bzw. abgewählt.

Sie erkennen an dem Haken in der rechten unteren Ecke ☒, ob das Bild für die Diashow ausgewählt ist.

- Um weitere Einstellungen vorzunehmen, drücken Sie auf **WEITER**. Das Display wechselt zu nebenstehendem Fenster.

Hier haben Sie die Möglichkeit folgende Parameter zu ändern:



Bildwechsel bei Diashow: Gibt an, wie viele Sekunden ein Bild auf dem Display angezeigt wird, bevor die Diashow zum nächsten Bild wechselt.

Wartezeit: Gibt an, wie lange das Display im Normalmodus bleibt, bevor die Diashow startet.

Aktiviert: Durch Setzen des Hakens wird der Screensaver aktiviert bzw. durch Entfernen deaktiviert.



Sie ändern die Parameter wie folgt:

- Wählen Sie direkt den Parameter, den Sie ändern möchten. Der markierte Parameter wird hellblau dargestellt.
- Ändern Sie über die Schaltflächen  und  den jeweiligen Parameterwert.
- Bestätigen Sie die Änderung mit **SPEICHERN**.

Sie können das Display nach einer bestimmten Zeit auch ganz ausschalten.



Kapitel 7 – Instandhaltung

In diesem Kapitel erfahren Sie

- wie Sie den Autoklav reinigen und welche Reinigungsmittel dafür geeignet sind
- wie Sie Fleckenbildung vermeiden
- welches Speisewasser Sie einsetzen können
- wie Sie die Türspindel ölen
- was Sie für die Wartung des Autoklaven beachten müssen

*Wöchentliche Kontrolle von
Kessel, Türdichtung, Halte-
rung, Kesseldichtfläche
Bei Verunreinigungen*

!
Achtung

Reinigen

Untersuchen Sie den Kessel einschließlich Türdichtung und Kesseldichtfläche und die Halterung für die Beladung (Seite 9, Abbildung 2) einmal wöchentlich auf Verunreinigungen, Ablagerungen oder Beschädigungen. Wenn Sie Verunreinigungen feststellen, ziehen Sie die vorhandenen Tablettts oder Kassetten und die zugehörige Halterung nach vorn aus dem Kessel heraus. Reinigen Sie die verunreinigten Teile.

Beachten Sie bei der Reinigung von Kessel, Halterung für die Beladung, Kesseldichtfläche und Türdichtung Folgendes:


- Schalten Sie den Autoklav vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kessel nicht heiß ist.
- Verwenden Sie ein weiches und fusselfreies Tuch.
- Verwenden Sie chlor- und essigfreie Reinigungsmittel.
- Tränken Sie zuerst das Tuch mit Reinigungsalkohol oder Spiritus und versuchen Sie die Verunreinigung mit diesem abzuwischen.
- Verwenden Sie nur bei hartnäckigen Verschmutzungen an Kessel, Halterung oder Kesseldichtfläche ein mildes Edelstahlputzmittel, dessen pH-Wert zwischen 5 und 8 liegt.
- Verwenden Sie für die Reinigung der Türdichtung neutrale Flüssigreinigungsmittel.
- Es dürfen keine Reinigungsmittel in die Rohrleitungen gelangen, die vom Autoklavenkessel abgehen.
- Verwenden Sie keine harten Gegenstände wie Topfreiniger aus Metall oder Stahlbürsten.

Bei Nichtbeachtung könnten die gereinigten Oberflächen zerkratzt, beschädigt und Dichtungsflächen undicht werden. Schmutzablagerungen und Korrosion in der Sterilisierkammer würden begünstigt.

*Gehäuseteile
Interner Vorratstank
für Speisewasser*

Reinigen Sie die Gehäuseteile mit neutralen Flüssigreinigern oder Spiritus. Wenn Sie die Versorgung mit Speisewasser manuell über den internen Vorratstank vornehmen, kontrollieren Sie diesen bei jedem Nachfüllen auf Verunreinigungen. Reinigen Sie den Vorratstank gegebenenfalls vor dem Auffüllen mit frischem Speisewasser. Reinigen Sie die linke Kammer des Vorratstanks (Abwasser) alle zwei Wochen.

Internen Vorratstank entleeren

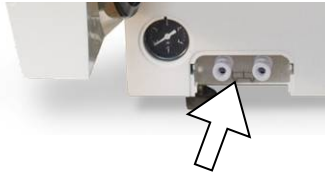

!
Achtung

Die Kammern des Vorratstanks entleeren Sie wie folgt:

- Ziehen Sie die Abdeckung für die Tankentleerung an der unteren Gerätefront nach vorn heraus.
- Stecken Sie den Entleerungsschlauch auf eine Schnellkupplung (links Abwassertank, rechts Speisewassertank), bis dieser spürbar einrastet.
- Lassen Sie das Wasser in einem Behälter mit mindestens 5 Liter Fassungsvermögen ab.
- Um den Entleerungsschlauch wieder zu entfernen, drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Schnellkupplung. Der Schlauch löst sich selbstständig aus der Kupplung.

Beachten Sie beim Entfernen der Schnellkupplung Folgendes:

- Stellen Sie sich zum Entleeren der Vorratskammern seitlich vor den Anschluss.
- Halten Sie beim Drücken des Entriegelungsknopfes der Schnellkupplung unbedingt mit der anderen Hand den Schlauch fest, um die Federkraft des Verschlusses abzufangen.

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen führen.

Fleckenbildung aufgrund unsachgemäß gereinigter Instrumente

Fleckenbildung aufgrund von Fremdrost

Fleckenbildung aufgrund mangelnder Qualität des Speisewassers

!
Achtung

Fleckenbildung vermeiden

Nur wenn Sie die Instrumente vor der Sterilisation richtig reinigen, vermeiden Sie, dass sich Rückstände von der Beladung oder Instrumentenaufbereitung unter dem Dampfdruck während der Sterilisation lösen. Gelöste Schmutzreste können die Filter, Düsen und Ventile des Autoklaven verstopfen und sich als Flecken und Ablagerungen auf den Instrumenten und im Kessel absetzen (siehe Seite 20, **Sterilisiergut vorbereiten**).

Alle Dampf führenden Teile des Autoklaven bestehen aus nicht rostenden Materialien. Das schließt eine durch den Autoklav verursachte Rostbildung aus. Sollten Rostflecke auftreten, handelt es sich um Fremdrost.

Bei falscher Instrumentenaufbereitung kann Rostbildung selbst an Edelstahlinstrumenten namhafter Hersteller auftreten. Oft genügt schon ein einziges Rost absonderndes Instrument, um auf den anderen Instrumenten oder im Autoklav Fremdrost entstehen zu lassen.

Entfernen Sie Fremdrost mit chlorfreien Edelstahlputzmitteln vom Instrumentarium (siehe Seite 43, **Reinigen**) oder geben Sie die beschädigten Instrumente an den Hersteller zur Aufarbeitung.

Der Umfang der Fleckenbildung auf dem Instrumentarium ist auch von der Qualität des für die Dampferzeugung verwendeten Speisewassers abhängig.

Qualitativ hochwertiges Speisewasser verwenden

Beachten Sie für den Einsatz von Speisewasser für die Dampfsterilisation Folgendes:

- Setzen Sie nur demineralisiertes oder destilliertes Wasser nach DIN EN 13060, Anhang C ein.

Bei Nichtbeachtung können Flecken auf den Instrumenten entstehen und die Funktionsfähigkeit des Autoklaven kann beeinträchtigt werden.

**HINWEIS!**

Speisewasser, das Sie im Osmoseverfahren mit der MELAdem®47 oder mit dem Ionentauscher MELAdem®40 oder durch Destillation mit MELAdes®65 preisgünstig herstellen können, erfüllt die Anforderungen an das Speisewasser.

Türspindel ölen

Ölen Sie die Türspindel im Abstand von zwei Monaten wie folgt:

- Reinigen Sie die Spindel mit einem fusselfreien Tuch.
- Geben Sie in die Gewindebuchse (Seite 9, **Abbildung 2/(4)**) in der Autoklaventür zwei Tropfen Öl aus der mitgelieferten Ölfflasche (Art.-Nr. 27515).

**HINWEIS**

Sie finden die Anweisung zum Ölen der Türspindel auf der Innenseite der Autoklaventür.

Wartung



- Lassen Sie die Wartung nur von geschulten Kundendiensttechnikern bzw. Technikern des Fachhandels durchführen. Wenden Sie sich hierfür an Ihren Fachhändler oder den MELAG Kundendienst in Ihrer Nähe.
- Halten Sie die vorgegebenen Wartungsabstände ein.

Nichtbeachtung kann zu Schäden am Autoklav und zu schweren gesundheitlichen Schäden führen.

Für Werterhaltung und Funktionstüchtigkeit

Wartungsabstände



Für die Werterhaltung und den zuverlässigen Praxisbetrieb des Autoklaven ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich.

Bei einer Wartung müssen alle funktions- und sicherheitsrelevanten Bauteile und elektrischen Einrichtungen überprüft und, wenn notwendig, ersetzt werden. Die Wartung muss nach der Wartungsanweisung, die für diesen Autoklav relevant ist, durchgeführt werden.

Lassen Sie die Wartung regelmäßig im Abstand von zwei Jahren oder nach je 2000 Programmzyklen vornehmen. Der Autoklav gibt zum gegebenen Zeitpunkt eine Wartungsmeldung aus.

Hinweis zur Betriebssicherheitsverordnung

Nach der BetrSichV §15 sind Betreiber von Druckgeräten (wie Autoklaven) dazu verpflichtet, ihr Gerät auf ordnungsgemäßen Zustand überprüfen zu lassen. Dazu stellen wir Ihnen auf unserer Internetseite einen entsprechenden Leitfaden zum Download bereit. Dieser zeigt Ihnen unsere Empfehlung, welche Bauteile, in welchen Zeitabständen zu überprüfen sind.

Kapitel 8 – Betriebspausen

In diesem Kapitel erfahren Sie

- wie schnell Sie Sterilisierprogramme nacheinander starten können
- was Sie bei kurzen Pausen und längeren Betriebspausen beachten müssen
- wie Sie den Autoklav außer Betrieb setzen, transportieren und wieder in Betrieb nehmen

Sterilisierhäufigkeit

Keine Pausenzeiten erforderlich

Pausenzeiten zwischen einzelnen Programmen sind nicht erforderlich, da die Sterilisierkammer permanent auf Temperatur gehalten wird. Nach Ablauf bzw. Abbruch der Trocknungszeit und Entnahme des Sterilgutes können Sie den Autoklav sofort neu beladen und ein Programm starten.

Pausenzeiten

Kurze Pausen zwischen den Sterilisationen

Halten Sie die Tür in den Pausen zwischen den Sterilisationen geschlossen, wenn der Autoklav eingeschaltet ist. Er benötigt so weniger Energie, um den Doppelmantel-Dampferzeuger auf Temperatur zu halten.

Pausen, die länger als eine Stunde dauern

Wenn die Pausen zwischen zwei Sterilisationen länger als eine Stunde dauern, empfiehlt Ihnen MELAG, den Autoklav auszuschalten. So können Sie Energie sparen. War der Autoklav eine Stunde ausgeschaltet, benötigt er ca. vier Minuten, um den Doppelmantel-Dampferzeuger wieder bis zur Startbereitschaft aufzuheizen.

Längere Betriebspausen

Soll der Autoklav bei längeren Betriebszeiten nicht ausgeschaltet werden, kann der Energiesparmodus eingestellt werden (siehe **Kapitel 6 – Einstellungen, Energiesparmodus**).

Betriebspausen, die länger als zwei Wochen dauern

Schalten Sie den Autoklav bei längeren Betriebspausen, z.B. über Nacht oder am Wochenende, aus und lehnen Sie die Tür nur an. So entlasten Sie die Türdichtung und schützen diese vor vorzeitiger Ermüdung. Außerdem beugen Sie dem Festkleben der Türdichtung vor.

Führen Sie nach Betriebspausen, die länger als zwei Wochen dauern, einen Vakuumtest und danach eine Leersterilisation mit dem Schnell-Programm S durch (siehe Seite 49, **Kapitel 9 – Funktionsprüfung**). Folgende Situationen können nach längeren Pausen auftreten:

Ereignis	Mögliche Ursache	Was Sie tun können
Leitwert zu hoch	Speisewasser schlecht	Wechseln Sie das Speisewasser bzw. das Mischbettharz bei einer MELAdem®-Anlage
Tür wird trotz laufendem Motor nicht geöffnet	Anhaften der Türdichtung an der Dichtfläche	Schalten Sie den Autoklav aus und ziehen Sie kräftig an der Tür, um sie zu öffnen.

Tabelle 11: Mögliche Situationen nach Betriebspausen, die länger als zwei Wochen dauern

Funktionsprüfung nach Pausen

Führen Sie nach Pausen in Abhängigkeit von der Pausendauer die unter **Kapitel 9 – Funktionsprüfung** beschriebenen Prüfungen durch.

Außerbetriebsetzung

Wenn Sie den Autoklav für eine längere Pause, z.B. wegen Urlaub, außer Betrieb setzen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie den Autoklav am Netzschalter aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Entleeren Sie den internen Vorratstank.
- Drehen Sie, wenn vorhanden, den Wasserzulauf der Wasser-Aufbereitungsanlage zu.

Transport

Autoklav tragen



Beachten Sie beim Tragen des Autoklaven Folgendes:

- Tragen Sie den Autoklav nur zu zweit.
- Verwenden Sie für das Tragen des Autoklaven geeignete Tragegurte.
- Beachten Sie, dass der Abstand zwischen Gehäusebodenplatte des Autoklaven und Aufstellfläche gering ist.

Bei Nichtbeachtung kann es zu Wirbelsäulenschäden, Quetschungen oder ernsthaften Verletzungen kommen.

Doppelmantel entleeren

Sie haben die Möglichkeit, das Wasser im Doppelmantel-Dampferzeuger ganz einfach über das Programm **Entleeren** abzulassen.

Dafür wird der Autoklav einmalig aufgeheizt und Druck im Doppelmantel aufgebaut, damit das Wasser vollständig aus dem Doppelmantel-Dampferzeuger entfernt werden kann.

Schalten Sie den Autoklav dann im Programmende-Bild **Entleerung beendet** aus, damit der Autoklav nicht wieder Wasser in den Doppelmantel speist.



- Entleeren Sie den internen Vorratstank.
- Bei Verwendung einer Wasser-Aufbereitungsanlage schließen Sie den Wasserzulauf und entfernen Sie die Schlauchanschlüsse an der Geräterückseite.
- Wenn Sie die Halterung und die Tablettts oder Kassetten beim Transport im Kessel belassen möchten, schützen Sie die Oberfläche der Türrolle. Legen Sie dazu z.B. ein Stück Schaumstoff oder Noppenfolie zwischen Türrolle und Halterung.
- Schließen Sie die Tür des Autoklaven, bevor Sie ihn bewegen.

Bei Nichtbeachtung können Schäden am Autoklav und Funktionsstörungen auftreten.

***Transport über größere
Distanz, Versand***



Beachten Sie für den Transport z.B. bei einem Umzug oder Versand des Autoklaven Folgendes:

- Für den Transport über eine größere Distanz und/oder bei Frostgefahr und/oder für den Versand muss eine autorisierte Person den Autoklav nach Anweisung vorbereiten und den Doppelmanteldampferzeuger vollständig leeren.

Bei Nichtbeachtung können Schäden am Autoklav und Funktionsstörungen auftreten.

Wie bei der ersten Inbetriebnahme verfahren

Wiederinbetriebnahme nach Ortswechsel

Bei der Wiederinbetriebnahme nach einem Ortswechsel des Autoklaven verfahren Sie wie bei einer Erstinbetriebnahme (siehe Seite 15, **Kapitel 3 – Erste Inbetriebnahme**).

Kapitel 9 – Funktionsprüfung

In diesem Kapitel erfahren Sie

- wie der Autoklav automatisch die Funktionsprüfung realisiert
- welche Möglichkeiten der manuellen Funktionsprüfung Sie haben
- welche Funktionsprüfungen Sie im täglichen Betrieb durchführen sollten
- wozu und wie Sie einen Vakuumtest durchführen
- wozu und wie Sie einen Bowie & Dick-Test durchführen

Prozessbeurteilungs- und Überwachungssystem

Automatische Funktionsprüfung

Durch die elektronische Parametersteuerung wird das Zusammenwirken der sterilisationsrelevanten Parameter Druck, Temperatur und Zeit ständig automatisch überwacht.

Das Prozessbeurteilungssystem des Autoklaven vergleicht die Prozessparameter während des Programms untereinander und überwacht diese hinsichtlich ihrer Grenzwerte.

Das Überwachungssystem des Autoklaven prüft die Gerätekomponten hinsichtlich ihrer Funktionstüchtigkeit und ihres plausiblen Zusammenspiels. Wenn die Parameter festgelegte Grenzwerte überschreiten, gibt der Autoklav Warnhinweise oder Störungsmeldungen aus. Wenn nötig, bricht er das Programm mit einem entsprechenden Hinweis ab.

Wenn das Programm erfolgreich beendet wurde, wird eine entsprechende Meldung auf dem Display ausgegeben.

Am Display und anhand der Protokolle

Manuelle Funktionsprüfung

Sie haben die Möglichkeit, anhand der angezeigten Werte auf dem Display den Programmablauf zu verfolgen.

Außerdem können Sie anhand des zu jedem Programm aufgezeichneten Protokolls nachvollziehen, ob ein Programm erfolgreich war (siehe Seite 29, Kapitel 5 – Protokollieren).



Prüfungen im täglichen Betrieb

HINWEIS!

Beachten Sie hierzu die Herstellerempfehlung von MELAG zum Routinebetrieb von Klasse-B-Autoklaven entsprechend den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes vom April 2006.

Wöchentlich im Routinebetrieb, bei Erstinbetriebnahme, nach Pausen länger als zwei Wochen und im Störfall

Vakuumtest

Führen Sie in folgenden Situationen einen Vakuumtest durch:

- im Routinebetrieb einmal wöchentlich
- bei der Erstinbetriebnahme
- nach längeren Betriebspausen
- im Fall einer entsprechenden Störung (z.B. im Vakuumsystem)

Der Test dient der Feststellung von Undichtheiten am Autoklav. Dabei wird die Leckrate ermittelt.

Führen Sie den Vakuumtest mit kaltem und trockenem Autoklav wie folgt durch:



- Schalten Sie den Autoklav am Netzschalter ein.
- Wählen Sie im Menü **Programme & Tests** den Vakuumtest aus.
- Drücken Sie START.

Der Kessel wird evakuiert, bis der Druck für den Vakuumtest erreicht ist. Es folgen eine Ausgleichszeit von fünf Minuten und eine Messzeit von zehn Minuten. Innerhalb der Messzeit wird der Druckanstieg im Kessel gemessen. Am Ende der Messzeit sehen Sie die Meldung mit Angabe der Leckrate am Display. Sollte die Leckrate zu hoch sein, wird eine entsprechende Meldung auf dem Display ausgegeben (bei wiederholtem Auftreten Fachhändler benachrichtigen).

Bowie & Dick-Test



Der Bowie & Dick-Test dient dem Nachweis der Dampfdurchdringung von porösen Materialien wie z.B. Textilien. Sie können zur Funktionskontrolle routinemäßig einen Nachweis für die Dampfdurchdringung durchführen. Dafür verwenden Sie das Testprogramm Bowie & Dick-Test.

Für den Bowie & Dick-Test werden im Fachhandel verschiedene Testsysteme angeboten. Führen Sie den Test nach den Herstellerangaben des Testsystems durch.

Kapitel 10 – Betriebsstörungen

In diesem Kapitel erfahren Sie

- welche Art von Mitteilungen es gibt
- wie Sie sich bei Störungen verhalten
- was Sie tun können, bevor Sie die Hotline anrufen
- was Sie bei schlechten Trocknungsergebnissen tun können

Eine Warnung ist keine Störung

Nicht alle Meldungen, die auf dem Display erscheinen, sind Störungsmeldungen. Warnhinweise und Störungsmeldungen werden mit einer Ereignisnummer am Display angezeigt. Diese Nummer dient zur Identifizierung.

Mitteilungen



Viele Meldungen sind Mitteilungen, die zu Ihrer Information dienen. Mitteilungen sind keine Störungsmeldungen oder Warnhinweise. Sie unterstützen Sie bei der Bedienung des Autoklaven.

Warnhinweise



Wenn notwendig, werden Warnhinweise angezeigt. Diese beinhalten Handlungsanweisungen für Sie. Warnhinweise sind keine Störungsmeldungen. Sie helfen Ihnen, den störungsfreien Betrieb sicherzustellen und unerwünschte Zustände zu erkennen. Beachten Sie diese Warnhinweise rechtzeitig, um Störungen zu vermeiden.

Störungsmeldungen



Wenn der sichere Betrieb oder die Sterilisiersicherheit nicht gewährleistet sind, werden Störungsmeldungen angezeigt.

Diese können kurz nach Einschalten des Autoklaven oder während eines Programmablaufs auf dem Display erscheinen.

Wenn während eines Programmablaufs ein Fehler auftritt, wird das Programm abgebrochen.



- Wenn ein Programm vor der Trocknung abgebrochen wird, ist die Beladung unsteril. Verpacken Sie ggf. neu und wiederholen Sie die Sterilisation für das betreffende Sterilisiergut.

Nichtbeachtung gefährdet die Gesundheit Ihrer Patienten und des Praxisteam.

Bevor Sie anrufen

Befolgen Sie die Handlungsanweisungen, die im Zusammenhang mit einem Warnhinweis oder einer Störungsmeldung am Display des Autoklaven angezeigt werden. Außerdem finden Sie in der nachfolgenden Tabelle die wichtigsten Ereignisse. Zu den Ereignissen sind mögliche Ursachen und entsprechende Bedienhinweise aufgelistet.

Sollten Sie das betreffende Ereignis nicht in der unten aufgeführten Tabel-

le finden oder Ihre Bemühungen nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an den autorisierten MELAG Kundendienst in Ihrer Nähe. Um Ihnen helfen zu können, halten Sie die Seriennummer Ihres Autoklaven und eine detaillierte Fehlerbeschreibung bereit.

Ereignis	Mögliche Ursachen	Was Sie tun können
61	Bei internem Vorratstank für Speisewasser: kein Wasser im Vorratstank, Bei Wasser-Aufbereitungsanlage: produziert kein Wasser, weil der Wasserhahn nicht offen ist	Internen Vorratstank befüllen, Wasserzulauf für die Wasser-Aufbereitungsanlage öffnen
63 64 65	Bei internem Vorratstank für Speisewasser: es wurde Wasser mit unzureichender Wasserqualität in den Vorratstank gegossen (>60µS/cm) Bei Wasser-Aufbereitungsanlage: Mischbettharz in der Wasser-Aufbereitungsanlage ist erschöpft	Vorratstank leeren und reinigen und Speisewasser der Qualität DIN EN 13060, Anhang C einfüllen Mischbettharz der Wasser-Aufbereitungsanlage erneuern
67 68	Wasserablauf nicht gewährleistet; die Maßnahmen in der Ankündigung des Spülvorgangs wurden nicht ergriffen	Wasserablauf ermöglichen, Sifon kontrollieren
72 73 74 75	Die Speisewasserqualität nimmt ab (>40 µS/cm), Mischbettharz bald erschöpft	Sie können noch alle Arbeiten mit dem Autoklav durchführen, sollten aber baldmöglichst neues Speisewasser einfüllen oder das Mischbettharz erneuern
76	siehe Ereignis 67	
78 79 80	Abwassertank wurde nicht oder nur unvollständig entleert	Abwassertank vollständig entleeren
102	Abgeknickter oder mit großen Senken verlegter Abwasserschlauch	Abwasserschlauch kontrollieren: muss mit stetigem Gefälle sackfrei verlegt sein
113	Autoklav wurde während eines laufenden Programms ausgeschaltet, Netzsteckerverbindung nicht vollständig hergestellt, Netzstecker wurde gezogen, Stromausfall in der Gebäudeversorgung	Autoklav nicht bei laufendem Programm am Netzschalter ausschalten, Gebäudeseitige Installation prüfen, Autoklav an einem separaten Stromkreis betreiben
116	Maximal zulässige Differenz zwischen theoretischer Temperatur und der am Temperatursensor 1 (AIN01) gemessenen Temperatur zu groß	Bei wiederholtem Auftreten Fachhändler benachrichtigen.
117	Temperatursensor 1 oder 2 defekt, Temperatur-Differenz zu groß	Bei wiederholtem Auftreten Fachhändler benachrichtigen.
118	Überschreitung der maximal zulässigen Sterilisationstemperatur an Temp.-Sensor 1 (AIN01)	Bei wiederholtem Auftreten Fachhändler benachrichtigen.
119	Unterschreitung der minimal zulässigen Sterilisationstemperatur an Temp.-Sensor 1 (AIN01)	Bei wiederholtem Auftreten Fachhändler benachrichtigen.
123 124 125 126	Umgebungstemperatur zu hoch, eingebauter Autoklav bekommt keine oder zu wenig Kühlluft, Autoklav ist überladen, Autoklav wurde ohne Halterung betrieben, so dass z.B. das Wäschepaket direkten Kontakt mit der Kammer hat und große Mengen Kondensat aufsaugt;	Aufstellhinweise beachten (siehe Seite 15, Anforderungen an den Aufstellort), Beladung kontrollieren, Hinweise zum Beladen beachten (siehe Seite 20, Autoklav beladen)

Ereignis	Mögliche Ursachen	Was Sie tun können
	Kühlluftansauglöcher in der Bodenplatte sind z.B. durch angesaugtes Papier verdeckt	Gegenstände (z.B. Papier) unterhalb des Autoklaven entfernen
128	siehe Ereignis 102	
129	Autoklav überladen Schlechte Netzversorgung (unterdimensionierte Hausinstallation zur Steckdose, schadhafte Steckdose, mehrere Geräte an einer Steckdose bzw. Absicherung)	Beladung kontrollieren, (siehe Seite 20, Autoklav beladen) Netzversorgung prüfen
134	siehe Ereignis 123	
136	Umgebungstemperatur zu hoch, Lüftungsschlitze verdeckt, minimaler Seitenabstand nicht eingehalten, Tür steht permanent offen	Aufstellbedingungen beachten (siehe Seite 15, Anforderungen an den Aufstellort), Tür schließen
183	siehe Ereignis 123	
175 176	ACOUT1-Hauptheizung bzw. ACOUT2-Regelheizung, elektrische Versorgung unterbrochen; FOY1+ FOY2 können im Wechsel auftreten.	1. Gerät ausschalten und Rückstellknopf Überhitzungsschutz wieder hineindrücken, 2. Störungsmeldung quittieren, 3. Autoklav aus- und wieder einschalten 4. Sterilisation fortsetzen bzw. eine Leersterilisation durchführen.
192	Hinweis auf nachfolgenden Spülvorgang, Spülbedingung im Speisewassertank soll hergestellt werden	Vorratstank mit Speisewasser voll befüllen oder Wasserversorgung der Wasser-Aufbereitungsanlage sicher stellen
193	Hinweis auf nachfolgenden Spülvorgang, Spülbedingung im Abwassertank soll hergestellt werden	Abwassertank vollständig entleeren
231	In folgenden Situationen ist keine CF-Card gesteckt: CF-Card ist im Menü Einstellungen → Protokollierung als Ausgabemedium ausgewählt und die Sofortausgabe ist aktiviert oder Protokollausgabe wird aus dem Menü Protokolle gestartet und CF-Card ist als Ausgabemedium festgelegt oder CF-Card soll formatiert werden	CF-Card in Kartenschacht stecken (siehe Seite 30, CF-Card als Ausgabemedium) ins Menü Protokolle wechseln und von dort die gewünschten Protokolle auf CF-Card speichern (siehe Seite 32, Gespeicherte Protokolle nachträglich ausgeben), Formatieren der CF-Card wiederholen
239	Monatsverzeichnis auf CF-Card ist voll (mehr als ca. 100 Protokolle)	Am Computer Protokolle aus Monatsverzeichnis in neu zu erstellende Verzeichnisse verschieben.
248	Vakuumtest bei Restfeuchte im Kessel oder mit Beladung	Vakuumtest wiederholen, wenn Autoklav kalt, trocken und leer ist
351	Seit der Erstinbetriebnahme oder seit der letzten Wartung sind zwei Jahre vergangen oder es wurden 2000 Sterilisierprogramme absolviert	MELAG Kundendienst oder Fachhändler anrufen und Wartungstermin vereinbaren; Autoklav lässt sich weiterhin starten
377	Versuch, Protokoll über den Protokoll-Drucker auszugeben, aber kein Protokoll-Drucker ist angeschlossen	Drucker anschließen (siehe Seite 31, Protokoll-Drucker als Ausgabemedium)
386	Interner Speicher des Autoklaven für die Protokolle der gelaufenen Programme ist fast voll	Lesen Sie den internen Protokollspeicher auf ein Speichermedium Ihrer Wahl über das Menü Protokolle aus (siehe Seite 32, Gespeicherte Protokolle nachträglich ausgeben)
387	Interner Speicher des Autoklaven für die Störprotokolle ist fast voll	Störprotokolle werden z.B. von den Technikern bei Wartung und Fehleranalyse benötigt. Lesen Sie den internen Störprotokollspeicher auf ein

Ereignis	Mögliche Ursachen	Was Sie tun können
		Speichermedium Ihrer Wahl über das Menü Protokolle aus.
394	Im Menü Einstellungen → Protokollierung ist Sofortausgabe aktiviert, und CF-Card ist als Ausgabemedium gewählt, war aber bisher nicht gesteckt.	Drücken Sie JA, wenn Sie jetzt die noch nicht ausgegebenen Protokolle auf CF-Card ausgeben möchten.
395	Im Menü Einstellungen → Protokollierung ist die Sofortausgabe aktiviert und der Protokoll-Drucker als Ausgabemedium ausgewählt, war aber bisher nicht angeschlossen.	Drücken Sie JA, wenn Sie jetzt die noch nicht ausgegebenen Protokolle drucken möchten.
396	Im Menü Einstellungen ist die Sofortausgabe aktiviert und der Computer als Ausgabemedium ausgewählt, war aber bisher nicht angeschlossen bzw. eingeschaltet.	Drücken Sie JA, wenn Sie jetzt die noch nicht auf den Computer übertragenen Protokolle ausgeben möchten.
408	siehe Ereignis 135	
414	Bei direktem Abwasseranschluss: abgeknickter Abwasserschlauch Autoklav ist überladen Autoklav steht in zu hoher Umgebungstemperatur, Autoklav ist eingebaut und bekommt keine oder zu wenig Kühlluft Autoklav wurde ohne Einsatzgestell betrieben, so dass z.B. das Wäschepaket direkten Kontakt mit der Kammer hat und große Mengen Kondensat aufsaugt. Dieses Kondensat verdampft beim Evakuieren und bildet große Mengen an Dampf; Kühlluftansauglöcher in der Bodenplatte sind durch z.B. angesaugtes Papier verdeckt	Abwasserschlauch auf Knicke oder Quetschung kontrollieren Maximale Beladungsmengen beachten; Für ausreichende Luftzufuhr an der Rückseite des Autoklaven sorgen Einsatzgestell verwenden; Kontrolle auf Verpackungsreste im Kessel;
428 439	Bei direktem Abwasseranschluss: Abgeknickter Abwasserschlauch, Schlechte Installation (mehrere Geräte an einem Sifon, Abwasserschlauch mit großen Senken) Verpackungsreste verstopfen Druckablassstutzen	Abwasserschlauch auf Knicke oder Quetschung kontrollieren, Kontrolle auf Verpackungsreste im Kessel
433	Maximal zulässige Differenz zwischen theoretischer Temperatur und der am Temperatursensor 2 (AIN02=Display) gemessenen Temperatur zu groß	Bei wiederholtem Auftreten Fachhändler benachrichtigen.
434	Überschreitung der maximal zulässigen Sterilisier-temperatur an Temp.-Sensor 2 (AIN02=Display)	Bei wiederholtem Auftreten Fachhändler benachrichtigen.
435	Unterschreitung der minimal zulässigen Sterilisier-temperatur an Temp.-Sensor 2 (AIN02=Display)	Bei wiederholtem Auftreten Fachhändler benachrichtigen.

Tabelle 12: Wichtige Warnhinweise und Störungsmeldungen

Schlechte Trocknungsergebnisse

Die Trocknung hängt, neben einer ordnungsgemäßen Gerätefunktion, entscheidend von der richtigen Aufstellung und Beladung des Autoklaven ab.

Was Sie tun können

- Kontrollieren Sie die korrekte Aufstellung des Autoklaven. Wenn notwendig vergrößern Sie die Schräglage, indem Sie die vorderen Gerätefüße um max. 2 Umdrehungen herausdrehen.
- Der Boden des Kessels muss frei sein. Entfernen Sie gegebenenfalls heruntergefallene Instrumente, Filterpapier oder ähnliches.
- Achten Sie auf die richtige Beladung des Autoklaven. Überladen Sie den Autoklav nicht. Achten Sie darauf, dass Textilien keinen direkten Kontakt mit Kesselwand und Boden haben.
- Nutzen Sie die Funktion Zusatztrocknung.

Technische Daten

Typbezeichnung	Vacuklav®41 B+	Vacuklav®43 B+
Geräteabmessungen (HxBxT)	56,5 x 47 x 57,5 cm	56,5 x 47 x 69 cm
Sterilisierkammer (DxT)	Ø 25 cm x 35 cm	Ø 25 cm x 45 cm
Volumen der Sterilisierkammer	18,4 Liter	23,8 Liter
Gewicht (leer)	59 kg	66 kg
elektrischer Anschluss	220 - 240 V* 50/60 Hz, 16 A separate Absicherung, FI-Schutz 30mA	
elektrische Leistung	3400 W	
Schalldruckpegel	64 dB(A) @ 1m	
Wärmeabgabe	6,2 MJ (Gesamtwärme, die in einer Stunde an die Umgebungsluft abgegeben wird)	
Max. Höhenlage	2000 m	
Umgebungstemperatur	5-40 °C (empfohlen max. 25 °C)	
Relative Luftfeuchtigkeit	80% bei 31 °C, linear abnehmend bis zu 50% relativer Luftfeuchte bei 40 °C	
Qualität des Speisewassers	destilliertes oder demineralisiertes Wasser nach DIN EN 13060, Anhang C	
Länge der Netzleitung	1,35 m	
Schutzart (nach IEC 60529)	IP20	
CE-Kennzeichnung	CE 0197, CE 0035	

*Beachten Sie den maximalen Spannungsbereich von 207-253V

Glossar

1:1 Kabel

(auch „Straight Through“-Kabel) oder „normales“ Netzkabel für die Verbindung eines Computers (durch Netzwerkkarte) mit dem Hub/Switch; entspricht auch dem direkten Anschluss eines Computers an die Netzwerkschnittstelle des Autoklaven. Das Kabel läuft in parallelen Pfaden zwischen den Steckern im Gegensatz zum Crossover Kabel.

aqua dem

→ demineralisiertes Wasser

aqua dest

→ destilliertes Wasser

Aufheizzeit

Zeit, die nach dem Einschalten des Autoklaven bzw. nach dem Start eines Sterilisierprogrammes für das Aufheizen des Doppelmantel-Dampferzeugers benötigt wird, bevor der Sterilisationsvorgang startet; die Dauer ist abhängig von der Temperatur, bei der sterilisiert wird.

autorisierte Personen

Techniker von Depots oder Mitarbeiter von durch MELAG benannten Kundendiensten, die von MELAG geschult werden.

BGV A1

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften – Grundsätze der Prävention

Bowie & Dick-Test

Dampfdurchdringungstest mit Norm-Prüfpaket; ist in DIN EN 285 beschrieben; Test ist in der Großsterilisation anerkannt

CF-Card

Compact Flash-Card;
Speicherkarte für digitale Daten mit kompakter Baugröße; CF ist ein genormter Standard, d.h. diese Speicherkarten sind in jedem Gerät mit CF-Steckplatz einsetzbar. Die CF-Card kann von jedem Gerät, das den Standard unterstützt, gelesen und ggf. beschrieben werden.

Charge

Zusammenfassung des Sterilgutes, das gemeinschaftlich ein und dasselbe Sterilisierprogramm durchlaufen hat.

Crossover Kabel

Ein Crossover Kabel vernetzt zwei Computer (durch Netzwerkkarte) direkt ohne Einsatz eines Hub/ Switch. Diese Art der Verbindung entspricht der Netzeinbindung des Autoklaven im (Praxis-)netzwerk. Das Crossover Kabel läuft nicht in parallelen Pfaden zwischen den Steckern, sondern es werden gewisse Kabeladern vertauscht bzw. „überkreuzt“ (engl.: to cross – kreuzen).

demineralisiertes Wasser

Wasser ohne die Mineralien, welche im normalen Quell- oder Leitungswasser vorkommen; wird durch Ionenaustausch aus normalem Leitungswasser gewonnen. Es wird hier als Speisewasser verwendet.

destilliertes Wasser

auch aqua dest von lat. aqua destillata; ist weitgehend frei von Salzen, organischen Stoffen und Mikroorganismen, wird durch Destillation (Verdampfen und anschließende Kondensation) aus normalem Leitungswasser oder vorge-reinigtem Wasser gewonnen. Es wird hier als →Speisewasser verwendet.

DGSV

Deutsche Gesellschaft für Sterilgutversorgung; die Ausbildungsrichtlinien der DGSV werden in DIN 58946, Teil 6 als "Anforderungen an das Personal" aufgeführt.

DIN 58953

Norm – Sterilisation, Sterilgutversorgung

DIN EN 867-5

Norm – Nichtbiologische Systeme für den Gebrauch in Sterilisatoren – Teil 5: Festlegungen von Indikatorsystemen und Prüfkörpern für die Leistungsprüfung von Klein-Sterilisatoren vom Typ B und vom Typ S

DIN EN 868

Norm – Verpackungsmaterialien und -systeme für zu sterilisierende Medizinprodukte

DIN EN ISO 11140-1

Norm – Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge – Chemische Indikatoren – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 13060

Norm – Dampf-Klein-Sterilisatoren

DIN EN 285

Norm – Sterilisation – Dampf-Sterilisatoren – Groß-Sterilisatoren

Doppelmantel-Dampferzeuger

dient der schnellen Dampferzeugung außerhalb der eigentlichen Sterilisierkammer, umgibt die Sterilisierkammer

dynamische Druckprüfung der Sterilisierkammer

dient zum Nachweis, dass die Rate der in der Sterilisierkammer auftretenden Druckänderungen während eines Sterilisierzyklus einen Wert nicht überschreitet, der zu einer Beschädigung des Verpackungsmaterials führen könnte. [→ DIN EN 13060]

Edelstahlputzmittel

z.B. Sidel

Einfache Hohlkörper

einseitig offener Körper, für den gilt:

$1 \leq L/D \leq 5$ und $D \geq 5$ mm oder

ein beidseitig offener Körper für den gilt:

$2 \leq L/D \leq 10$ und $D \geq 5$

L...Hohlkörperlänge

D...Hohlkörperdurchmesser

[→ DIN EN 13060]

Einfache Verpackung

einmal verpackt, z.B. in einer Folie versiegelte Instrumente
– Gegensatz dazu: Mehrfachverpackung

Evakuierung

Herstellung eines Vakuums in einem Gefäß

Firewall

ist eine Kombination von Hard- und Software als Netzwerk-Sicherheitskomponente. Zweck einer Firewall ist, den Datenverkehr zwischen Netzwerksegmenten mit verschiedenen Vertrauens-Stufen abzusichern. Ein typischer Einsatz ist, den Übergang zwischen einem lokalen Netzwerk (LAN) – hohes Vertrauen – und dem Internet – kein Vertrauen – zu kontrollieren. Sie kann z.B. verhindern, dass ein FTP-Server (-programm) Daten von einem anderen Netzwerkteilnehmer (Autoklav) oder Computer empfängt.

Fraktioniertes Vakuumverfahren

technisches Verfahren der Dampfsterilisation;
ist die mehrmalige Evakuierung der Sterilisierkammer im Wechsel mit Dampfteinlass.

FTP

(engl.: **F**ile **T**ransfer **P**rotocol) ist ein Datenübertragungsverfahren, das dem Transport von Daten aus dem Internet dient. Diese Daten können Programme, Dateien oder auch Informationen enthalten. Spezielle FTP-Programme (FTP-Clients) dienen dazu, die Daten auf einen Server zu laden (Upload).

Gemischte Beladung

verpacktes und unverpacktes Sterilisiergut innerhalb einer Beladung

Handshake

Ein Handshake-Verfahren ist eine einfache Methode der Datenflusskontrolle, mit der sich zwei an einer Datenübertragung beteiligte Teilnehmer nach jedem Übertragungsvorgang durch unmittelbare Quittierungssignale über Steuerleitungen synchronisieren.

Hohlkörper A

→Produkt mit engem Lumen

Hohlkörper B

→Einfacher Hohlkörper

Hub

(engl.: Nabe, Knotenpunkt) dient dazu, in einem Netzwerk mehrere Computer, z.B. durch ein Ethernet sternförmig zu verbinden, d.h. alle Geräte im Netzwerk werden an den Hub angeschlossen.

initialisieren

Herstellen eines bestimmten Ausgangszustandes der Software beim Starten

Kondensat

Flüssigkeit (z. B. Wasser), die bei Abkühlung aus dem dampfförmigen Zustand hervorgeht und sich so abscheidet

Korrosion

chemische Veränderung oder Zerstörung metallischer Werkstoffe durch Wasser und Chemikalien

Kontamination

hier: Verunreinigung der Sterilisatorbeladung mit unerwünschten bzw. schädlichen Stoffen

LED(-Leiste)

(Abk.: Light Emitting Diode; deutsch: Leuchtdiode)
Halbleiterdiode, die bei Stromzufuhr leuchtet. LEDs werden vorwiegend bei Statusanzeigen von Geräten verwendet.

Leerkammerprüfung

Prüfung ohne Beladung; wird durchgeführt, um die Leistung des Sterilisators ohne den Einfluss einer Beladung zu beurteilen; ermöglicht die Überprüfung der erhaltenen Temperaturen und Drücke gegenüber den vorgesehenen Einstellungen. [→ DIN EN 13060]

Leitwert

ist der Kehrwert des elektrischen Widerstandes; Maßeinheit ist MikroSiemens/Zentimeter ($\mu\text{S}/\text{cm}$); Je mehr Stoffe im Wasser gelöst sind, desto besser leitet es elektrischen Strom und desto höher ist dessen Leitwert.
Destilliertes Wasser hat im Idealfall den Leitwert Null.

Luftleckage – Prüfung der Luftleckage

Luftleckage ist eine undichte Stelle, durch die unerwünscht Luft ein- bzw. austreten kann;

Prüfung der Luftleckage dient zum Nachweis, dass das Volumen des Lufteintritts in die Sterilisierkammer während der Vakuumphasen einen Wert nicht überschreitet, der das Eindringen von Dampf in die Sterilisatorbeladung verhindert, und dass die Luftleckage keine mögliche Ursache einer erneuten Kontamination der Sterilisatorbeladung während der Trocknung ist.

massiv

ohne Hohl- oder Zwischenräume, fest, dicht, geschlossen

massive Beladung – Prüfung bei massiver Beladung

dient zum Nachweis, dass bei den Werten, auf die die Steuerung eingestellt ist, die erforderlichen Sterilisationsbedingungen innerhalb der gesamten Beladung erreicht werden. Die Beladung muss die Höchstmasse an massiven Instrumenten darstellen, für deren Sterilisation ein Sterilisator nach DIN EN 13060 ausgelegt ist. [DIN EN 13060]

Mehrfachverpackung

z.B. doppelt in Folie versiegelte oder in Folie verpackte Instrumente befinden sich zusätzlich in einem Behälter oder in Textilien eingeschlagene Container.

MELAG-Netzwerkadapter

Ethernet-Drucker-Modul für den MELAG-Drucker MELAprint®42; auf der einen Seite befindet sich der Druckeranschluss, auf der anderen die Anschlussbuchse für ein Netzwerkkabel

multithreadfähig

bezeichnet das gleichzeitige Abarbeiten mehrerer Threads (Ausführungsstränge in einem Prozess). Bezug nehmend auf ein FTP-Server-Programm können mehrere Benutzer

gleichzeitig dort Daten ablegen, d.h. mehrere Autoklaven gleichzeitig Protokolle an den FTP-Server schicken.

normkonform

Übereinstimmung mit allen relevanten Normen

Ping

ist ein Diagnoseprogramm zum Testen der Verfügbarkeit und Reaktionszeit von Computern in Netzwerken.

porös

durchlässig für Flüssigkeiten und Luft, z.B. Textilien

poröse Kleinteile

aus Materialien, die Fluide (z.B. Flüssigkeiten) absorbieren können

Poröse Teilbeladung – Prüfung bei poröser Teilbeladung

dient zum Nachweis, dass bei den Werten, auf die die Steuerung eingestellt ist, der Dampf schnell und gleichmäßig in das festgelegte Prüfpaket eindringt
[→ DIN EN 13060]

Poröse Vollbeladung – Prüfung bei poröser Vollbeladung

dient zum Nachweis, dass bei den Werten, auf die die Steuerung eingestellt ist, die erforderlichen Sterilisationsbedingungen in porösen Ladungen mit der maximalen Dichte erreicht werden, für deren Sterilisation ein Sterilisator nach DIN EN 13060 ausgelegt ist
[DIN EN 13060]

Produkt mit engem Lumen

einseitig offener Körper, für den gilt:
 $1 \leq L/D \leq 750$ und $L \leq 1500$ mm oder
 ein beidseitig offener Körper für den gilt:
 $2 \leq L/D \leq 1500$ und $L \leq 3000$ mm und der nicht dem Hohlkörper B entspricht
 L...Hohlkörperlänge
 D...Hohlkörperdurchmesser
 [→ DIN EN 13060]

Prozessbeurteilungssystem

auch Self-Monitoring-System – beobachtet sich selbst, vergleicht Messfühler während laufender Programme untereinander

RKI

Robert-Koch-Institut

Schmiermittel

z.B. Instrumentenöl

Self-Monitoring-System

→ Prozessbeurteilungssystem

Siedeverzug

ist das Phänomen, dass man unter bestimmten Bedingungen Flüssigkeiten über ihren Siedepunkt hinaus erhitzen kann, ohne dass sie sieden; dieser Zustand ist instabil; bei geringer Erschütterung kann sich innerhalb kürzester Zeit eine große Gasblase ausbilden, die sich explosionsartig ausdehnt.

Software

nicht materielle Bestandteile eines EDV-Systems; z.B. Computerprogramm

Speisewasser

wird zur Erzeugung des Wasserdampfes für die Sterilisation benötigt; Richtwerte für die Wasserqualität gemäß DIN EN 285 bzw. DIN EN 13060 – Anhang C

Sterilgut

wird auch als Charge bezeichnet, ist bereits erfolgreich sterilisiertes, also steriles Gut

Sterilisierkammer

Innenraum eines Sterilisators
nimmt das Sterilisiergut auf

Sterilisiergut

ist unsteriles, sterilisierbares noch zu sterilisierendes Gut

Switch

Ein Switch (engl.: Schalter, auch Weiche) ist eine Netzwerk-Komponente zur Verbindung mehrerer Computer bzw. Netzwerk-Segmente in einem lokalen Netzwerk (LAN). Da Switches den Netzwerkverkehr analysieren und logische Entscheidungen treffen, werden sie auch als intelligente Switches bezeichnet.

TCP

(engl. transmission control protocol) bezeichnet ein Standard-Protokoll zur Verbindung von Rechnern und Netzwerken.

Vakuum

Umgangssprachlich: materiefreier Raum
im technischen Sinne: Volumen mit verringertem Gasdruck (zumeist Luftdruck)

Vakuumtrocknung

schonende Trocknung; das Trockengut wird einem Unterdruck ausgesetzt, was den Siedepunkt reduziert und somit auch bei niedrigen Temperaturen zu einer Verdampfung des Wassers führt.

VDE

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.

Vorwärmzeit

→ Aufheizzeit

weiche Sterilisierverpackung

z.B. Papierbeutel oder Klarsicht-Sterilisierverpackungen

Anhang A – Zubehör

	<i>Artikel</i>	<i>Bestell-Nummer</i>	
		41 B+	43 B+
Halterungen	B für 4 Norm-Tray-Kassetten	40234	40224
	C für 6 Tablettts oder 3 Norm-Tray-Kassetten	40232	40242
	D für 2 hohe Kassetten oder 4 Tablettts	46840	
Sterilisierbehälter mit Einmal-Papierfilter nach DIN EN 868-8	15K (LxBxH: 18x12x4,5 cm)	01151	
	15M (LxBxH: 35x12x4,5 cm)	01152	
	15G (LxBxH: 35x12x8 cm)	01153	
	17K (LxBxH: 20x14x5 cm)	01171	
	17M (LxBxH: 41x14x5 cm)		01172
	17G (LxBxH: 14x14x9 cm)		01173
	23M (LxBxH: 42x16x6 cm)		01231
	23G (LxBxH: 42x16x12 cm)		01232
	28M (LxBxH: 32x16x6 cm)	01284	
	28G (LxBxH: 32x16x12 cm)	01285	
Tupfertrommeln mit Filtertuch	17R (Ø13x10,5 cm)	00174	
	23R (Ø18x14 cm)	00233	
Norm Tray-Kassetten	Gelocht (LxBxH:., Tiefe/Breite/Höhe in mm: 29x/19x/4 cm)		
	▪ mit Filtertuch	00289	
	▪ ohne Filtertuch	00286	
MELAstore System	MELAstore-Tray 50 (LxBxH: 18 x 11,8 x 3 cm)	01180	
	MELAstore-Tray 100 (LxBxH: 27,5 x 17,6 x 3 cm)	01181	
	MELAstore-Tray 200 (LxBxH: 27,5 x 17,6 x 4,3 cm)	01182	
	MELAstore-Box 200 (LxBxH: 31,2 x 19 x 6,5 cm)	01191	
	MELAstore-Box 100 (LxBxH: 31,2 x 19 x 4,6 cm)	01192	
Tablettts	Tablett	00280	00230
Prüfkörpersystem	MELAcontro [®] bestehend aus Helix-Prüfkörper und 250 Indikatorstreifen	01080	
	MELAcontro [®] PRO bestehend aus Helix-Prüfkörper und 40 Indikatorstreifen	01075	
Wasseraufbereitungsanlagen	MELAdem [®] 40 Ionenaustauscher	01049	
	MELAdem [®] 47 Umkehr-Osmose-Anlage	01047	
Für die Dokumentation	Label-Printer MELAprint [®] 60	01160	
	Protokoll-Drucker MELAprint [®] 42	01042	
	MELAflash CF-Card	01043	
	MELAflash Kartenlesegerät	01048	
	MELAG Netzwerkadapter für MELAprint [®] 42	40295	
Sonstiges	Wasserstopp	01056	
	Aufputz-Siphon	37410	